

Table of Contents

EN - English	21
Documentation Notice	21
Overview	21
Specifications	21
Product Information.....	25
Warnings and Limitations of Use.....	25
Location of Safety and Compliance Labels	25
Voltage Warning.....	26
Laser Warning	27
Temperature Warning.....	28
Compliance.....	28
Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes	28
ESD Caution	29
Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation.....	29
Potential for Radio and Television Interference	29
Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity.....	30
Safety Precautions.....	32
Location Precautions	33
Cleaning Precautions	34
Media	34
Codonics Paper/White Film Media.....	35
File Transfer via FTP and LPR.....	35
Color Management.....	35
Image Scaling.....	35
Hardware Variations.....	35
Disposal Requirements.....	36
European Disposal Requirements	36
Indications for Use.....	36
User Manual Warnings and Cautions	37

CS - čeština	122
Dokumentace Oznámení	122
Přehled	122
Specifikace	122
Produkt Informace	126
Varování a Omezení z Použití	126
Umístění z Bezpečnost a Dodržování Štítky	126
Napětí Varování.....	127
Laser Varování	128

Teplota Varování	129
Dodržování	129
Seriál Číslo, Konfigurace, datum Kód, a Úpravy Kódy	129
ESD Pozor	130
Potenciál pro Rádio Frekvence Rušení na Imager Úkon	130
Potenciál pro Rádio a Televize Rušení	130
Vedení Ohledně Elektromagnetické Emise a Imunita.....	131
Bezpečnost Opatření	133
Umístění Opatření	134
Čištění Opatření.....	135
Média	135
Codonics Papír / bílá Film Média	136
Soubor Převod přes FTP a LPR.....	136
Barva Řízení	136
obraz Škálování.....	136
Hardware Variace	137
Likvidace Požadavky	137
evropský Likvidace Požadavky	137
Indikace pro Použití	138
Uživatel Manuál Varování a Upozornění	138

Horizon® Ci

Multi-media Imager

EN - English

Documentation Notice

Codonics Products are Class I products intended for use by Healthcare Professionals. Products packaging and labeling, including Graphic User Interface (GUI) for operation are offered in English and meet MDR, Annex I, Chapter III, 23.4, taking account the training and the knowledge of the potential user.

*Web information, Key Specifications, Intended Use, User manual Appendix, Quick Start Guide & Setup IFU are available in simple translation Member State Languages; primary IFU are available in English.

Overview

Horizon Ci combines diagnostic film, color paper and grayscale paper printing to provide the world's most versatile medical imager.

Featuring color paper to show off your latest imaging techniques, room light viewable grayscale paper to cut your costs and a compact, counter-top design, Horizon obsoletes film-only imagers. High speed image processing, networking and spooling are all standard.

Specifications

Print Technology: Dye-diffusion and direct thermal (dry, daylight safe operation)

Spatial Resolution: 320 DPI (12.6 pixels/mm)

Throughput: Up to 100 films per hour

Time To Operate: 5 minutes (ready to print from "off")

Grayscale Contrast Resolution: 12 bits (4096)

Color Resolution: 16.7 million colors

256 levels each of cyan, magenta, and yellow

Media Inputs: Three supply cassettes, 50-100 sheets each, one color ribbon

Media Outputs: Three receive trays, 50-sheet capacity each

Media Sizes: 8" x 10", 14" x 17" (blue and clear) DirectVista® Film A, A4, 14" x 17" DirectVista

Grayscale Paper A, A4 ChromaVista® Color Paper

Dmax: >3.0 with DirectVista Film

Archival: >20 years with DirectVista Film, under ANSI extended-term storage conditions

Media Supply: All media is pre-packaged and factory sealed

Interfaces: Standard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Diagnostic Port, Serial Console

Network Protocols: Standard: FTP, LPR

Optional: DICOM (up to 24 simultaneous connections), Windows network printing

Image Formats: Standard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster,

Targa

Optional: DICOM, PostScript™ compatibility

Image Quality: Automatic calibration using built-in densitometer

Image Control: Gamma, Contrast, Saturation, Medical Color Matching (MCM™), Polarity, Rotation, Scaling, Antialiasing
Sheet Control: Density Adjustment (Dmax), Look-Up Tables (LUT), Image Warnings, Captions, Sheet Coverage, Border Color, Border Fill, Crop Anchor
Sheet Formatting: 1:1 - 1:81; Variable Multi-Formatting (VMF™), Fixed Multi-Formatting (FMF™)
Control Panel: Large, backlit LCD display, Status lights include Online, Alert, Fault, Active Power and Menu navigation buttons
Processor: Intel
Memory: 512 MB RAM
Hard Disk: SSD, 32 GB (24 GB available for spooling)
Removable Storage: USB for software upgrades
Smart Card: 72 KB for storing configuration data
Power: Universal Input: 100-120/230V~ 50/60 Hz, 600W printing, 150W idle
Heat Emission: Maximum 600W, 2,050 BTUs/hr. printing, 150W, 512 BTUs/hr. idle Weight: 66 lbs. (30 kg.)
Engine Dimensions: 14.5" (37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24" (61 cm) L
Environment: Operating Temperature: 15-30C, Storage: -22.2 - 50.6C, Operating Humidity: 10-70% R.H. (non-condensing)
Regulatory: Full medical device compliance including Class 2 FDA and Class I MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN
ISO 13485:2016, Electrical Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI:
FCC Class A and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities

Conventions Used in the User Manual


Bulleted Lists

Bullets are used to display a list of nonprocedural items. For example:

The control panel contains:

- A display panel
- Keys
- Indicators

Numbered Steps

The  icon indicates the beginning of a procedure. The steps in a procedure are numbered. For example:

1. Press the **MENU** key.

The Main Menu displays on the control panel. The selector arrow () automatically points to the first menu option.

2. To scroll through the menu options, press the up and down keys.

The selector arrow (►) moves up and down through the list. The bottom portion of the control panel display shows a message associated with the currently selected menu option.

Control Panel Navigation

Menu paths are used in some procedures instead of documenting every step needed to navigate to a specific menu option. For example:

From the Main Menu, select the following options:

Default Media
Grayscale
DV Film Blue

Control Panel Keys

Control panel keys are shown in small black ovals to resemble the actual keys, for example, “Press the ENTER key.”

Control Panel Menu Options

Control panel menu options are shown in bold type, for example, “Select the **Gamma** menu option.”

Notes and Tips

Notes contain additional information related to a topic or procedure. For example:

NOTE: If your network is managed by a network administrator or an information technology (IT) department, it would be considered a complex network. You should have the responsible person perform any network-related administrative tasks.

Tips provide additional insights about a topic or procedure (such as, why you may want to do something or a faster way to perform an operation). For example:

***TIP:** Specifying print settings in a multi-user environment*

If the Horizon imager is accessed by multiple users, it is typically better for individual users to enter print values through the DICOM application interface rather than change the default settings through the control panel.

Cautions and Warnings

Cautions alert you to actions or situations that could cause harm to equipment or data. For example:

CAUTION Any changes you make to the imager default settings will also affect prints made by other users. Use caution when changing default settings.

Warnings alert you to actions or situations that could result in personal injury. For example:

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green.

Text Files and Displayed Text

Monospaced type is used for the contents of an ASCII file or machine text displayed in a terminal command window.

User Data

Bold monospaced type is used to indicate specific characters or words that you enter at a host workstation when performing advanced imager operations. *If the type is also italicized*, it indicates variable text. For example:

1. From your workstation, open a UNIX or MS-DOS command window.
2. Enter the command **telnet *hostname*** or **telnet *IP Address*** (using either the Horizon imager hostname or IP Address).
3. At the login prompt, enter the command **status**.

Important Information and Filenames

- **Bold type** is used for emphasis, command names, and paths or filenames. For example:
- The Horizon imager default settings can be changed both at the control panel and using text files. The hostname and IP Address must be added to the **/etc/hosts** file.

New Terms

Italic type is used when a term is introduced and defined. For example:

- The Horizon imager has a complete set of *default settings* that contain preconfigured values for every aspect of a printed sheet.

Purpose and Scope

Refer to this user manual for procedures on how to perform the most common imager operations, including:

- Setting up the imager
- Loading media
- Sending print jobs from DICOM Print Service Classcompliant applications running on imaging devices or image viewing workstation
- Sending print jobs from workstations via PostScript
- Sending print jobs using FTP and LPR
- Changing the imager's default image and sheet settings
- Adjusting the appearance of printed images for user preference
- Performing preventive maintenance
- Performing film calibration
- Troubleshooting common problems

NOTE: Some features and functions described here may not apply to older versions of the software.

This User's Manual is intended to be as simple and straightforward as possible for the everyday user. If you need more detailed or more technical information on a feature or topic, or wish to perform more advanced operations, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*

(Catalog no. HORIZON MNL T). The Technical Manual serves as a companion document to this manual

Product Information

For technical assistance with the Horizon, call Codonics Technical Support at the following number:

Phone: +1.440.243.1198

Toll Free: 800.444.1198 (USA only)

Technical Support is available anytime. Technical Support is also available online via email and the Codonics web site:

Email: support@codonics.com

Web Site: www.codonics.com

General product information can also be requested by sending email to:


Email: info@codonics.com

Please include your postal mailing address and telephone number in the email message. Basic product information is returned via email unless otherwise requested.

Warnings and Limitations of Use

Location of Safety and Compliance Labels

The following figure shows the locations of the imager's safety and compliance labels.

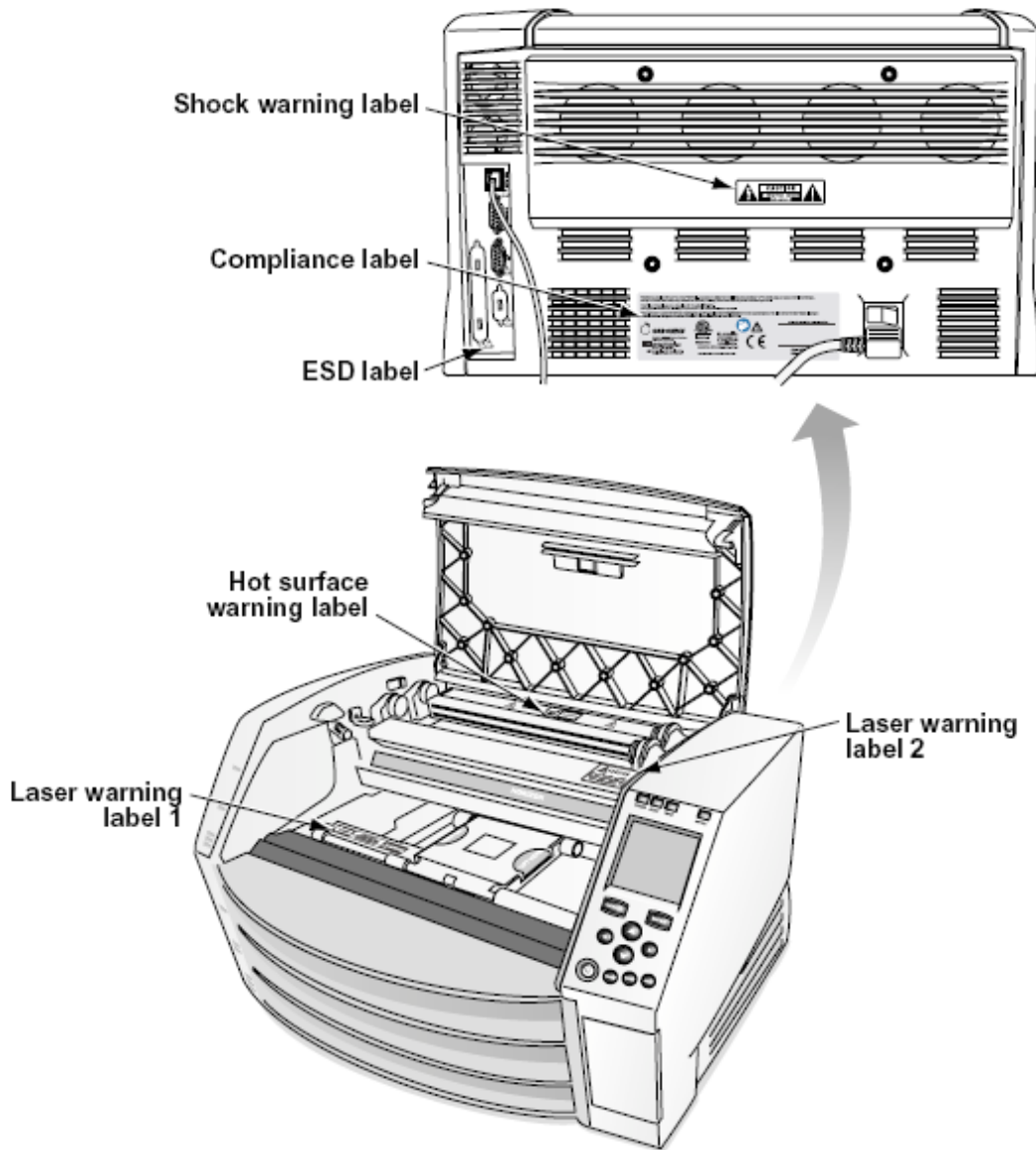

Voltage Warning

The exclamation point within an equilateral triangle and person reading a manual symbol are intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this device.



NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. REMOVAL OF LABELS, COVERS, OR ENCASMENT FASTENERS VOIDS THE WARRANTY.

THIS APPARATUS MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS IMAGER TO RAIN OR MOISTURE.

EQUIPMENT IS NOT TO BE USED AS A COMPONENT OF A LIFE SUPPORT SYSTEM. Life support devices or systems are devices or systems that support or sustain life, and whose failure to perform can be reasonably expected to result in a significant injury or death to a person. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

WARNING Grounding reliability can be achieved only when the Horizon is connected to a receptacle marked “Hospital Only” (that is, “Hospital Grade”).

WARNING The power cord connected to the Horizon is the main disconnect for the system.

WARNING To disconnect overall power to the Horizon prior to servicing it, power of the system.

WARNING Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer

WARNING External equipment intended for connection to signal input, signal output, or other connectors, shall comply with relevant IEC standard (e.g., IEC 60950 for IT equipment and the IEC 60601 series for medical equipment). In addition, all such combinations - systems - shall comply with the IEC 60601-1 standard for Medical Electrical Equipment Systems. Equipment not complying to IEC 60601 shall be kept outside the patient environment, as defined in the standard. Any person who connects external equipment to signal input, signal output, or other connectors has formed a system and is therefore responsible for the system to comply with the requirements of IEC 60601-1-1. If in doubt, contact a qualified technician or Codonics Technical Support for approved configurations.

WARNING Do not touch a patient while also accessing the internal components that are under the top cover or receive trays.


Laser Warning

The Horizon imager uses a laser to read barcode information on the media cassettes. The laser module is a 650 – 670nm device of 1.26 mW or less. As such it has been found to comply with the 21 CFR 1040.10 and 1040.11 and IEC 60825 laser standards as a low power Class 1 device.


For safety reasons, the laser is turned on only for a short time when a cassette is inserted. Still, one should use caution and never stare at the laser beam, should avoid exposure to the laser, and should never override any of the interlocks and safety mechanisms. These measures are taken for your protection.

WARNING Use of controls or adjustments to the performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

The laser apertures are marked with a single label, shown below. There are three apertures that correspond to the three cassette locations, one for each, on the same side of the Horizon imager as this label.

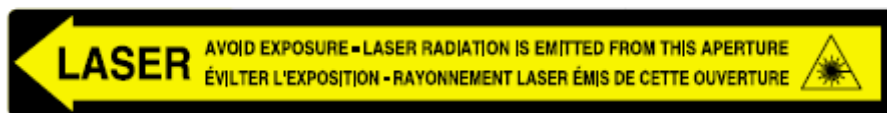

Safety interlocks are marked by the following label. They are located on the same side of the Horizon imager as this label.

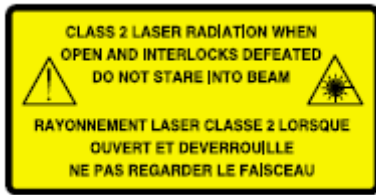

Temperature Warning


Because the Horizon imager is a thermal print device, the surface of the thermal print head heat sink gets hot. Avoid directly touching any components not colored green when accessing the interior of the imager if the imager has been printing. (During some preventative maintenance tasks, you will be touching internal components with cleaning pads or swabs.)

The temperature warning label is shown below.

Compliance

Codonics is in compliance with various regulations.

The Compliance label, which is affixed at the back of the imager, is shown below.

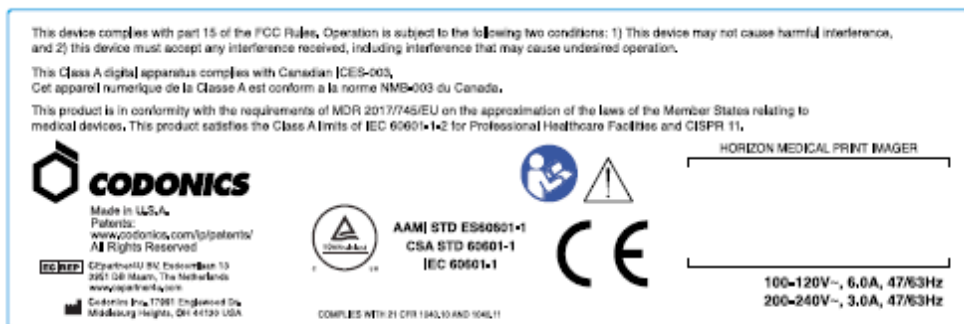


Compliance label

Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification Codes


The Serial number label is placed onto the Compliance label. It includes the following information.

- The serial number (SN), which uniquely identifies the unit.
- The Configuration number (CNFG), which details the build configuration.
- The modifications codes, which are to the right of the CNFG number and are a series of 20 numbers. When any of these numbers are blocked out, that identifies a modification that was made to the unit.
- The date code in YYYY-MM format below the factory date code symbol.

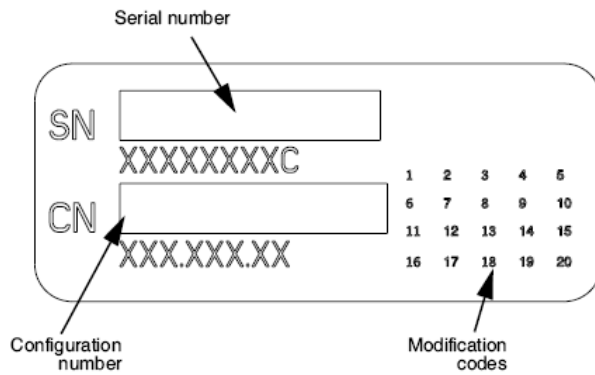

ESD Caution

Connections to other pieces of equipment are made at the rear of the Horizon imager. These connectors are marked with a precautionary ESD warning symbol, as shown below. Do not touch any of the pins of these connectors. When making connections to the imager, it is best done while the imager is plugged in but not powered on. ESD may cause erratic behavior of the imager when powered on. Should this occur, power to the imager may have to be cycled. It is recommended that all staff involved in making connections to the imager be aware of these ESD precautions.

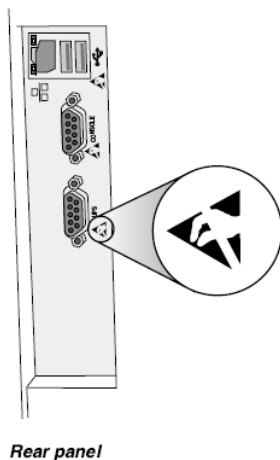

Potential for Radio Frequency Interference on Imager Operation

Both portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment, including the Horizon imager. Keep such RF communications equipment out of the immediate area.

Potential for Radio and Television Interference

The Horizon imager generates and uses radio frequency energy, and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with Class B emission limits for a computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operating in a commercial environment. Operation of the equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user, at his own expense, will be required to take whatever measures may be appropriate to correct the interference. If your imager does cause interference to radio or television reception, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna
- Relocate the imager with respect to the receiver

If necessary, you should consult Codonics technical support or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

This product is in conformity with the requirements of EC Council directive MDR 2017/745/EU (CE) on the approximation of the laws of the Member States relating to medical devices. This product satisfies the Class A limits of IEC60601-1-2 and CISPR 11. A declaration of conformity with the requirements of the Directive has been signed by the Director of Operations. Horizon is approved for export via FDA Certificates to Foreign Government and registered as a medical device for import. A current list of countries is available on request.

Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity

Suitable Environments:

- Horizon is intended for use in professional healthcare facility environments, including hospitals and medical clinics.
- Horizon has not been evaluated for use near HF surgical equipment. If use near HF surgical equipment is desired, the user is responsible for verifying proper operation of the Horizon. If Horizon does not perform correctly in this environment, move the Horizon farther from the source of the electromagnetic disturbance.
- Horizon has not been evaluated for use in emergency medical vehicles.

As a support device, Horizon does not provide essential performance.

WARNING Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

WARNING Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the Horizon, its cables, or accessories. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
RF Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
RF Emissions	Class A
FCC Part 15	
Conducted Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
Harmonic Distortion	Class A
IEC 61000-3-2	
Voltage Fluctuations and Flicker	Complies
IEC 61000-3-3	

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
Electrostatic Discharge	±8kV contact
IEC 61000-4-2	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
Radiated RF Immunity	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
Proximity fields from RF wireless equipment	Complies
IEC 61000-4-3	
Electrical Fast Transient / Burst	AC Port: ± 2 kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: ± 1 kV, 100 kHz repetition frequency
Surge	Line-to-Line: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV, ± 2.0 kV
Conducted Immunity	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Magnetic Field Immunity	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
Voltage Dips	0% U_T , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% U_T , 1 cycle AND 70% U_T , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
Voltage Interruptions	0% U_T , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

Safety Precautions

- Never connect this imager to any outlet or power supply that has a voltage or frequency different than that specified on the rear of the imager.
- When servicing the imager, always power it off using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

- Damage to the power cord may cause fire or shock hazard. When unplugging the power cord, hold it by the plug only and remove the plug carefully.
- If the power cord needs to be replaced, replace it only with another Codonics power cord manufactured specifically for your imager's power configuration.
- If the imager is smoking or making unusual sounds, power off and unplug the imager immediately.
- Do not insert foreign objects of any kind into the imager; doing so can constitute a safety hazard and cause extensive damage.
- Do not place any liquid containers on the imager. If, for some reason, liquid seeps into the imager, power off the imager and unplug the power cord from the source outlet. If used without corrective measures, the imager may be damaged.
- Do not use the imager near flammable gases.
- With the imager top cover open or the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green (shown in the following figure). Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.



Internal Components That Are Colored Green (called out in the illustration) Are Safe to Touch

Location Precautions

- The imager's operating ambient temperature range is 15–30°C (59–86°F), with a relative humidity of 10%–80%.
- If the imager is moved quickly from an extremely cold place to a warmer one, condensation is likely to form. Do not use the imager if condensation has formed. Wait until the condensation has evaporated. You can speed up the evaporation time by moving the imager to a dryer location.
- Ventilation slots and holes are provided on the sides and rear of the imager. Place the imager on a hard level surface and locate it at least 10 cm (4 in.) from walls to ensure proper ventilation

CAUTION Adequate ventilation is required for proper operation of the imager

CAUTION When positioning the Horizon Imager, ensure there is adequate space to access the rear power switch.

- Do not place imager in a high humidity or high dust area. Airborne dirt particles can cause image quality problems. Avoid placing the imager in areas where ventilation ducts, open doors, or frequent passers-by might expose the imager and media to high levels of debris.
- Do not locate the imager in hot-springs areas where hydrogen sulfide and acidic ions are likely to be generated.
- Do not locate the imager where there are oily fumes and vapors.
- Do not locate the imager in direct sunlight.
- Do not locate imager near sources of high RF energy.
- Do not locate the imager where it might be subject to jarring or vibrations, such as a table or desk in a hightraffic area. Jarring and vibrations can affect the print quality of images.
- Horizon satisfies the electrical safety limits of IEC60601-1 and CISPR 11 and is suitable for patient care area location. Check with local ordinances and installation guidelines to confirm approved location requirements.

Cleaning Precautions

- Many plastic components are used in the imager's construction. Coat flecking and deformation is likely to occur if the imager is wiped with chemical dusters, benzene, thinners, insecticides, or other solvents. Rubber and PVC materials left in contact with the imager for extended times will cause damage. Never use petroleumbased solutions or abrasive cleaners.
- To clean the imager cover, first power off the imager using the (power) key at the control panel, then turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager. Clean the cover with a soft cloth slightly moistened with a mild soap and water solution. Allow the cover to completely dry before operating the imager again.

Media

For **ChromaVista**[®] color prints, the consumed ribbon contains facsimiles of any patient images printed to **ChromaVista** color sheets. Therefore, you must properly dispose of or destroy consumed ribbon to ensure the confidentiality of patient images.

The optical density of reflective and transmissive prints have a nominal range of: Dmin = 0.10 OD (reflective), 0.11 OD (transmissive) to Dmax = 2.10 OD (reflective), 3.1 OD (transmissive). Actual optical densities may vary based on media variations and on the instrument being used to measure density. For example, **DirectVista**[®] Clear film may have a lower Dmin and Dmax than **DirectVista** Blue film.

- The Horizon imager includes a built-in densitometer. The built-in densitometer is designed to produce consistent prints by compensating for variation from one film cassette to another and one imager to another. For applications that require absolute control of the maximum density, the results should be checked against a bench-top commercial densitometer. The internal densitometer can be calibrated to a desktop unit. See the *Horizon Imager Technical Manual* for more information.

- **DirectVista** media is optimized for grayscale prints, while **ChromaVista** is optimized for color prints. If **ChromaVista** is not giving you satisfactory results with grayscale images, you may want to consider using **DirectVista** media for those applications.
- Media variations between different production lots may produce subtle differences in image quality and color. These variations most often occur in color ribbons and are characterized as a slight color hue in grayscale images.
- Codonics film media is designed to be viewed using a light box suitable for viewing medical diagnostic images.
- Codonics paper/white film media is designed to be viewed under coolwhite, fluorescent light. Spectral differences and intensity variations in the viewing light sources can change the apparent color of images printed on paper/white film.
- Printed images that are subject to prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light, or extreme heat may degrade in image quality. (For example, printed sheets should not be stored in an automobile on a sunny day.) Precautions should be used to avoid prolonged direct exposure.

Codonics Paper/White Film Media

The terms “white paper” and “white film” are synonymous references and used interchangeably in this manual.

File Transfer via FTP and LPR

- Different users who share a user name when transferring files to the imager may cause unpredictable and erroneous printed output. The imager associates information with the user name. Each user should have a unique user name when connecting to the imager via FTP and LPR.

Color Management

- Image settings—including gamma, contrast, Dmax, saturation, and MCM™ (Medical Color Matching™)—are intended to compensate for differences that may occur between image acquisition and image printing. These filters allow you to accurately render the final printed image. You should use care when applying these filters to avoid over compensation.
- The Default User Settings set at the control panel will potentially affect prints made by all users. Use caution when changing the default settings.

Image Scaling

- Scaling an image will filter the original image data and add or remove information, which may affect the accuracy of the final printed image. The amount of information added or removed will also vary with the magnitude of the scale factor applied. This can also affect the accuracy of the final printed image. You should be aware of the properties and limitations of each scaling algorithm and select the appropriate algorithm for the task.

Hardware Variations

- Components used in the imager may vary, causing differences in image quality. The thermal process of producing a print utilizes many components that are calibrated to provide consistency between imagers. There are subtle differences between imagers that can cause print

variations. These differences usually apply to thermal print head calibration. Other factors such as age, usage, heat, mechanical wear, and shipping can affect image color and quality.

- The type of media used to install software updates and to backup imager configuration settings depends on hardware variations. If the imager has a built-in Zip drive, installations and backups are performed using 100-MB Zip disks. If the imager does not have a built-in Zip drive, USB flash drives are used with the USB ports on the rear panel. Throughout this manual, Zip disks and USB flash drives are referred to as *installation media* or *backup media*, depending on the operation being performed.

NOTE: If the imager has both a Zip drive and a USB port, always use the Zip disk to install software and save configuration settings.

Disposal Requirements

Disposal of this product and consumables shall be in accordance with all applicable laws and regulations in effect at the locality at the time of disposal.

European Disposal Requirements

Codonics imagers and electronic accessory devices are not to be discarded or recycled; rather they are to be returned to the manufacturer. Contact Codonics directly or by the link provided for the latest information concerning:

- Identification of the country-specific Importer/Distributor/Producer
- Product return and treatment of our electronic products

Manufacturer: Codonics Inc.

17991 Englewood Drive

Middleburg Heights, OH 44130 USA

Phone: +1.440.243.1198

Fax: +1.440.243.1334

E-mail: WEEE@Codonics.com

www.Codonics.com

Codonics electronic products and accessories bearing the following symbol are subject to European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC, amended by Directive 2003/108/EC. The EN 50419 symbol indicates separate collection and return required.



EN 50419 symbol

Indications for Use

CAUTION Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

The intended use of the Horizon Series Imagers is high-resolution hardcopy imaging of digital image source material and through the conversion of electronic signals from a wide variety of direct/indirect medical imaging modality outputs. The hardcopy output includes, however is not limited to, digital radiography, nuclear medicine, ultrasound, CT, MRI, CR, and Radiation Therapy planning. Images are suitable for medical image diagnosis use and referral. The system is intended for use by medical radiologists, imaging modality specialists, and communications to referring physicians.

The Horizon Series Imagers are dry, thermal, grayscale (G, GS,GSs,GS-Rad, G1, and G2 models) and grayscale/color (Ci, Ci-s, CiRAD, and SF models) direct thermal printer/imagers.

The Horizon XL is a special model adding 14 x 36in. and 14 x 51in. true size "long" media that permits digital direct orthopedic application hardcopy, including diagnosis and analysis of scoliosis, weight bearing spine/hip/knee, and long bone/hip prosthetic and orthopedic appliances work-up and surgical planning. Horizon XL is applicable to true-size hardcopy of whole body CT, MRI, and Angiographic and Venous flow imaging procedures.

Horizon Imagers are 510(k) cleared to market as FDA Class 2 devices, Regulation number 892.2040, Classification Product Code LMC: Horizon Series Medical Multimedia Dry Imagers K021054 and Horizon XL Medical Long Film Imager Hardcopy Multimedia K060440.

User Manual Warnings and Cautions

CAUTION Approved FDA Class 2 device - Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

CAUTION Make sure that the table can support the weight of the imager [approximately 66.7 kg (147 lbs) with receive trays and three full supply cassettes installed].

WARNING The imager is heavy. To avoid injury, use two people to unpack and position the imager.

CAUTION Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

CAUTION Make sure that the imager is powered off before connecting the Ethernet cable. For information about powering the imager on and off, refer to "Powering the Imager On and Off".

CAUTION Do not touch any of the connector pins.

CAUTION If the thermal print head is not parked, power on the imager, then repeat steps 2 and 3 to properly power off the imager so that it does park.

CAUTION Push the ribbon carriage down slowly. Forcing it down too quickly may damage the carriage.

CAUTION If the imager is powered off using the POWER key, unprinted queued jobs are saved and will finish printing once the imager is powered on again (you can purge all jobs). However, if the imager is powered off using the rocker switch in the back or power is interrupted (for example, an unexpected power failure), queued jobs may be lost.

WARNING When servicing the imager, always power it off using the POWER key, turn the rocker switch in the back to the 0 (off) position, then unplug the imager.

CAUTION Use only Codonics media. Do not use plain paper, office transparencies, or other unapproved media as damage, improper operation, or malfunction may result. For information about the approved Codonics media types and sizes, and how to order cassettes, refer to "Ordering Media".

CAUTION Do not refill a cassette. Do not tamper with or remove the barcode label. The cassette's barcode information is essential for ensuring diagnostic image quality. Compromising the cassette in any way jeopardizes the quality and reliability of the imager.

CAUTION Do not remove or insert a cassette while a sheet is being printed, or you could affect the image quality of the printed sheet or cause a jam. Always pause the imager first.

CAUTION Do not remove the printed cassette cover; it protects the media from dust and other contaminants. Always hold and store the cassette with the open side up to prevent the sheets from falling out.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Used ribbon retains the negative of the color images that were printed using that ribbon. If you are required to ensure patient confidentiality and privacy, the ribbon should be destroyed.

CAUTION Use caution when changing the imager default settings. Changes could affect prints made by other users.

CAUTION Changing the default settings will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the DICOM application or a PostScript printer's settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

CAUTION If the imager's settings were changed from the factory defaults prior to being shipped (for example, to accommodate a special OEM configuration), resetting to the factory defaults will not restore the "as shipped" settings. Instead, they will be reset to the standard factory default values.

CAUTION Resetting to the factory defaults will affect prints made by other users. Use caution when changing default settings. Typically, it is better to specify sheet and image parameter settings from the DICOM application or a PostScript printer's settings, or use a Job Settings file that contains the values you need. For information about Job Settings files, refer to the *Horizon Imager Technical Manual*.

CAUTION Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

CAUTION Changing the imager's Default Media and Default User Settings could affect subsequent prints made by other users. Use caution when changing default settings.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

WARNING The thermal print head may be hot.

WARNING When cleaning the print head, avoid the extreme ends of the print head, which are sharp.

CAUTION Use only the print head cleaning wipe when cleaning the thermal print head. Also, do not touch the glass surface of the thermal print head with your fingers; it could damage the print head. To avoid touching the glass surface, you may want to wear gloves when cleaning the thermal print head.

CAUTION The thermal print head must be completely dry before attempting to use the imager.

Allowing the thermal print head to heat up again while still wet will damage the thermal print head.

WARNING With the imager cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the platen. The platen roller could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

WARNING With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only the platen roller cleaning wipe when cleaning the pick tires. The tires could be damaged if you use the print head cleaning wipe.

CAUTION Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

WARNING With the receive trays removed, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Use only cleaning swabs from a Barcode Reader Cleaning Kit.

CAUTION Do not scratch or nick the sheet metal. Scratches and nicks in the basement will damage the printed side of ChromaVista sheets.

CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

WARNING With the top cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Do not touch the pick tires (which may be white or green); body oils from your fingers are hard to remove and could eventually damage the tires.

CAUTION To avoid damaging internal components, use care when removing a sheet from the media path in the upper part of the imager.

CAUTION Never put a sheet back in the cassette. Dust or oil from your finger will affect the image quality.

WARNING With the top cover open, touch only those internal components that are colored green. Remove rings, ties, jewelry, and other items, and tie back hair, so that they do not fall into or get caught in the imager.

CAUTION Be careful not to scratch the polished sheet metal or damage the sensor near the upper guide notch.

CAUTION Make sure you do not overrotate the media guide, as shown below.

CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician.

CAUTION Use care when running the Purge Print Jobs function. This function will purge other users' print jobs as well as yours.

CAUTION All files uploaded using anonymous FTP are readable by other FTP users. DO NOT upload sensitive or classified information.

Horizon® Ci

Multimédia Imager

CS - čeština

Dokumentace Oznámení

Codonics produkty jsou Třída Já produkty zamýšlený pro použití podle Zdravotní péče Profesionálové.

produkty obal a Značení, počítaje v to Grafický Uživatel Rozhraní (GUI) pro úkon jsou Óodkázal v Angličtina a setkat MDR, Příloha Já, Kapitola III, 23,4, brát účet the výcvik a the znalost z the potenciál uživatel.

* Web informace, Klíč Specifikace, Zamýšlený Použití, Uživatel manuál Slepé střevo, Rychlý Start Průvodce & Založit POKUD TY jsou k dispozici v jednoduchý překlad Člen Stát Jazyky; hlavní POKUD TY jsou k dispozici v Angličtina.

Přehled

Horizon Ci kombinuje diagnostický film, barva papír a stupně šedi papír tisk na poskytnout the svět je většina univerzální lékařský zobrazovač.

Představovat barva papír na ukázat vypnuto vaše nejnovější zobrazování techniky, pokoj, místnost světlo viditelný

stupně šedi papír na stříh vaše náklady a A kompaktní, pult design, Horizon zastaralé pouze film zobrazovače. Vysoký Rychlost obraz zpracovává se, sífování a zařazování jsou Všechno Standard.

Specifikace

Tisk Technologie: Difúze barviva a Přímou tepelný (suchý, denní světlo bezpečný úkon)

Prostorový Rozlišení: 320 DPI (12.6 pixely / mm)

Propustnost: Nahoru na 100 filmy za hodina

Čas Na Fungovat: 5 minut (připraven na tisk z "vypnuto")

Stupně šedi Kontrast Rozlišení: 12 bity (4096)

Barva Rozlišení: 16.7 milión barvy

256 úrovně každý z tyrkysová, purpurová, a žlutá

Média Vstupy: Tři zásobování kazety, 50-100 povlečení na postel každý, jeden barva stuha

Média Výstupy: Tři dostávat podnosy, 50 listů kapacita každý

Média Velikosti: 8 " X 10 ", 14 " X 17 " (modrý a Průhledná) DirectVista® Film A, A4, 14 " X 17 "

DirectVista Stupně šedi Papír A, A4 ChromaVista® Barva Paper

Dmax: > 3.0 s DirectVista Film

Archiv: > 20 let s DirectVista Film, pod ANSI dlouhodobě úložný prostor podmínky

Média Zásobování: Všechno média je předbalený a továrna zapečetěný

Rozhraní: Standard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), Seriál Diagnostický Přístav, Seriál Řídicí panel

Síť Protokoly: Standard: FTP, LPR

Volitelný: DICOM (nahoru na 24 simultánní připojení), Okna síť tisk

obraz Formáty: Standard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Slunce
Rastrový, Targa
Volitelný: DICOM, PostScript™ kompatibilita
obraz Kvalitní: Automatický kalibrace použitím vestavěný denzitometr
obraz Řízení: Gama, Kontrast, Nasycení, Lékařský Barva Vhodný (MCM™), Polarita, rotace,
Škálování, Anti aliasing
Prostředí Řízení: Hustota Nastavení (Dmax), Vzhlednout Tabulky (LUT), obraz Varování, titulky,
Prostředí Pokrytstáří, okraj Barva, okraj Vyplnit, Oříznutí Kotva
Prostředí Formátování: 1: 1 - 1:81; Variabilní Víceformátování (VMF™), Pevný Víceformátování
(FMF™)
Řízení Panel: Velký, podsvícený LCD Zobrazit, Postavení světla zahrnout Online, Výstraha, Chyba,
Aktivní Napájení a Jídelní lístek navigace tlačítka
Procesor: Intel
Paměť: 512 MB RAM
Tvrký Disk: SSD, 32 GB (24 GB k dispozici pro zařazování)
Odnímatelné Úložný prostor: USB pro software upgrady
Chytrý Kartu: 72 KB pro skladování konfigurace data
Napájení: Univerzální Vstup: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 600 W tisk, 150 W. líný
Teplota Emise: Maximum 600 W, 2050 BTU / hod. tisk, 150 W, 512 BTU / hod. líný Hmotnost: 66 lbs. (30
kg.)
Motor Rozměry: 14,5 " (37 cm) H, 20,5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L
Životní prostředí: Provozní Teplota: 15-30 ° C, Úložný prostor: -22,2 - 50,6 ° C, Provozní Vlhkost
vzduchu: 10-70% R.H. (nekondenzující)
Regulační: Plný lékařský přístroj dodržování počítaje v to Třída 2 FDA a Třída Já
MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN
ISO 13485: 2016, Elektrický Bezpečnost IEC 60601-1 Vyd. 3.1 a EMC / EMI:
FCC Třída A a IEC 60601-1-2: Vyd. 4 pro Profesionální Zdravotní péče Zařízení

Konvence Použitý v the Uživatel Manuál

Odrážky Seznamy

Kulky jsou použity na Zobrazit A seznam z neprocedurální položky. Pro příklad:

The řízení panel obsahuje:

- A Zobrazit panel
- Klíče
- Ukazatele

Číslovaný Kroky

The  ikona označuje the začátek z A postup. The kroky v A postup jsou očíslované. Pro příklad:

1. lis the **JÍDELNÍ LÍSTEK** klíč.

The Hlavní Jídelní lístek displeje na the řízení panel. The volič Šíp(▶) automaticky bodů na the První Jídelní lístek volba.

2. Na svitek přes the Jídelní lístek možnosti, lis the nahoru a dolů klíče.

The volič Šíp (▶) tahy nahoru a dolů přes the seznam. The dno část z the řízení panel Zobrazit ukazuje A zpráva spojené s the v současné době vybraný Jídelní lístek volba.

Řízení Panel Navigování

Jídelní lístek cesty jsou použity v nějaký postupy namísto z dokumentování každý krok potřeboval na navigovat na A charakteristický Jídelní lístek volba. Pro příklad:

Z the Hlavní Jídelní lístek, vybrat the Následující možnosti:

Výchozí Média

Stupně šedi

DV Film Modrý

Řízení Panel Klíče

Řízení panel klíče jsou zobrazeno v malý Černá ovály na podobat se the aktuální klíče, pro příklad, "Lis the ENTER klíč."

Řízení Panel Jídelní lístek Možnosti

Řízení panel Jídelní lístek možnosti jsou zobrazeno v tučně typ, pro příklad, "Vybrat the **Gama** Jídelní lístek volba."

Poznámky a Tipy

Poznámky obsahovat další informace příbuzný na A téma nebo postup. Pro příklad:

POZNÁMKA: Li vaše síť je podařilo se podle A síť správce nebo an informace technologie (TO) oddělení, to bych být považováno A komplex síť. Vy by měl mít the odpovědný osoba provést žádný související se sítí správní úkoly.

Tipy poskytnout další postřehy o A téma nebo postup (takový tak jako, proč vy smět chci na dělat něco nebo A rychlejší cesta na provést an úkon). Pro příklad:

SPROPITNĚ: *Upřesnění tisk nastavení v A Multi uživatel životní prostředí*

Li the Horizon zobrazovač je přístupné podle násobek uživatelé, to je typicky lepší pro individuální uživateli na vstoupit tisk hodnoty přes the DICOM aplikace rozhraní spíše než změna the výchozí nastavení přes the řízení panel.

Upozornění a Varování

Upozornění výstraha vy na akce nebo situacích že mohl způsobit poškodit na zařízení nebo data. Pro příklad:

POZOR Žádný Změny vy udělat na the zobrazovač výchozí nastavení vůle Ataké postihnout tisky vyrobeno podle jiný uživatelů. Použití Pozor když měnící se výchozí nastavení.

Varování výstraha vy na akce nebo situacích že mohl výsledek v osobní zranění. Pro příklad:

VAROVÁNÍ S the zobrazovač Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený.

Text Soubory a Zobrazeno Text

Neproporcionální typ je použitý pro the obsah z an ASCII soubor nebo stroj text zobrazí se v A terminál příkaz okno.

Uživatel Data

tučně neproporcionální typ je použitý na naznačit charakteristický postavy nebo slova že vy vstoupit v A hostitel pracovní stanice když předvádění pokročilý zobrazovač operace. *Li the typ je taky kurzíva*, to označuje proměnná text. Pro příklad:

1. Z vaše pracovní stanice, otevřeno A UNIX nebo MS-DOS příkaz okno.
2. Enter the příkaz **telnet *název hostitele*** nebo **telnet *IP Adresa*** (použitím bud' the Horizon zobrazovač *název hostitele* nebo *IP Adresa*).
3. V the přihlásit se výzva, vstoupit the příkaz **postavení**.

Důležité Informace a Názvy souborů

- **tučně typ** je použitý pro důraz, příkaz jména, a cesty nebo názvy souborů. Pro příklad:
- The Horizon zobrazovač výchozí nastavení umět být změněno oba v the řízení panel a použitím text soubory. The *název hostitele* a *IP Adresa* musí být přidáno na the **/atd/ *hostitelé*** soubor.

Nový Podmínky

Kurzíva typ je použitý když A období je představen a definována. Pro příklad:

- The Horizon zobrazovač má A kompletní soubor z *výchozí nastavení* že obsahovat předkonfigurováno hodnoty pro každý aspekt z A tištěný prostěradlo.

Účel a Rozsah

Viz na tento uživatel manuál pro postupy na jak na provést the většina běžný zobrazovač operace, počítaje v to:

- Nastavení nahoru the zobrazovač
- načítání média
- Odesílá se tisk pracovní místa z DICOM Tisk Servis Třídav souladu aplikace běh na zobrazování zařízení nebo obraz prohlížení pracovní stanice
- Odesílá se tisk pracovní místa z pracovní stanice přes PostScript
- Odesílá se tisk pracovní místa použitím FTP a LPR
- Mění se the zobrazovač výchozí obraz a prostěradlo nastavení
- Nastavování the vzhled z tištěný snímky pro uživatel přednost
- Předvádění preventivní údržba
- Předvádění film kalibrace
- Odstraňování problémů běžný problémy

POZNÁMKA: Nějaký funkce a funkce popsáno tady smět ne aplikovat na starší verze z the software.

Tento Uživatel Manuál je zamýšlený na být tak jako jednoduchý a přímočarý tak jako možný pro the každý den uživatel. Li vy potřeba více detailní nebo více technický informace na A Vlastnosti

nebo téma, nebo přání na provést více pokročilý operace, viz na the *Horizon Imager Technický Manuál* (Katalogové č.HORIZONMNL). The Technický Manuál slouží tak jako A společník dokument na tento manuál

Produkt Informace

Pro technický pomoc s the Horizon, volání Codonics Technický Podpěra, podpora v the Následující číslo:

Telefon:+1.440.243.1198

Toll Volný, uvolnit: 800.444.1198 (USA pouze)

Technický Podpěra, podpora je k dispozici kdykoli. Technický Podpěra, podpora je taky k dispozici online přes e-mailem a the Codonics web stránky:

E-mailem:Podpěra, podpora@Codonika.com

Web Stránky: www.Codonika.com

Všeobecné produkt informace umět taky být požadováno podle odesílání e-mailem na:


E-mailem:info @Codonika.com

Prosím zahrnout vaše poštovní mailing adresa a telefon číslo v the e-mailem zpráva. Základní produkt informace je vrátil přes e-mailem pokud v opačném případě požadováno.

Varování a Omezení z Použití

Umístění z Bezpečnost a Dodržování Štítky

The Následující postava ukazuje the umístění z the zobrazovač bezpečnost a dodržování štítky.

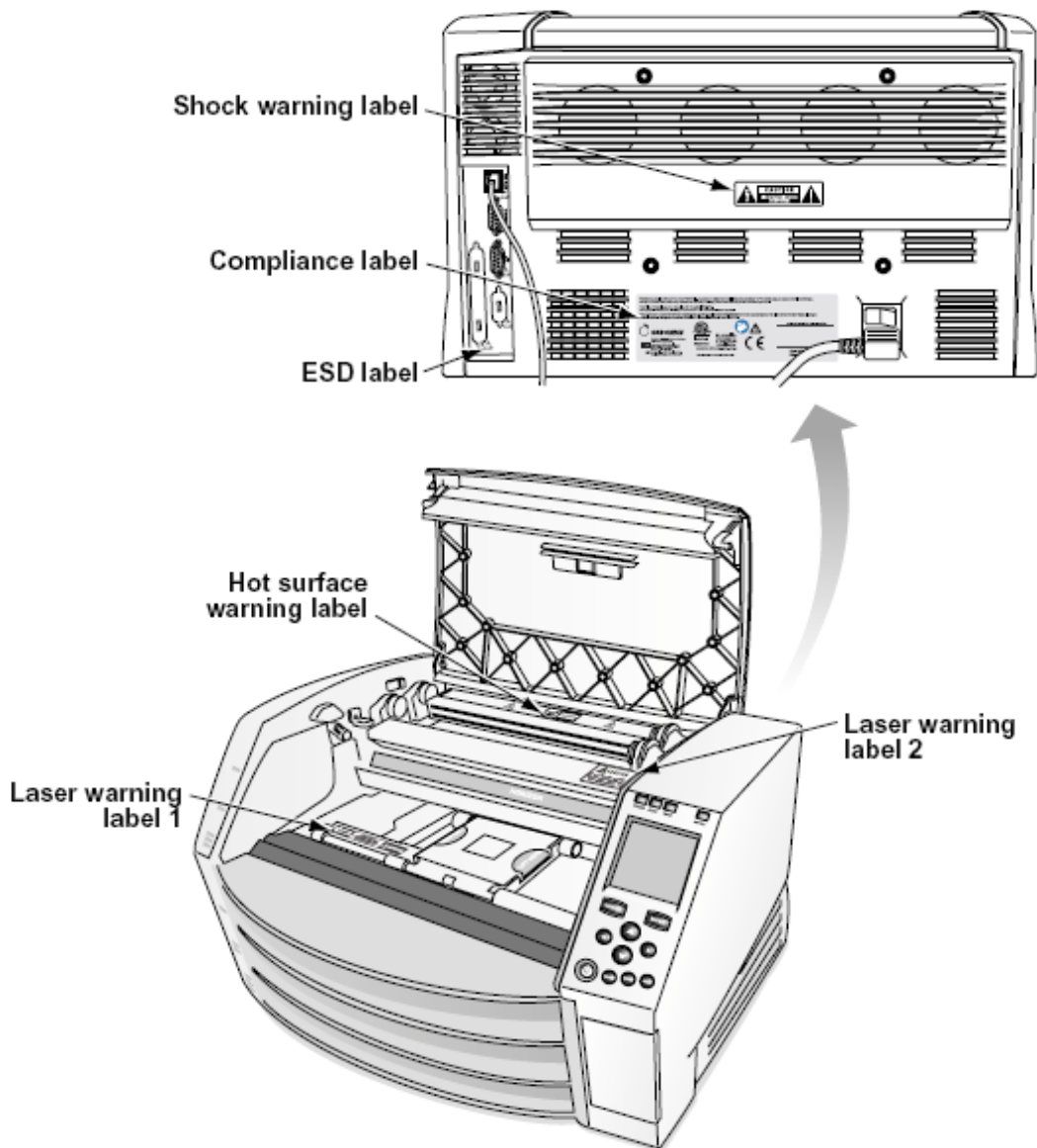

Napětí Varování

The výkřik směřovat v rámci an rovnostranný trojúhelník a osoba čtení A manuál symbol jsou zamýšlený na výstraha the uživatel na the přítomnost z Důležité provozní a údržba (servis) instrukce v the literatura doprovázející tento přístroj.



NE UŽIVATELSKÉ SLUŽBY DÍLY UVNITŘ. DOPORUČTE SERVIS NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS PERSONÁL. ODSTRANĚNÍ Z ŠTÍTKY, KRYTY, NEBO ZAPLACENÍ FASTENERY NEPLATNOSTI THE ZÁRUKA.

TENTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ELEKTRICKY UZEMNĚN.

NA ZABRÁNIT OHEŇ NEBO ŠOKOVAT NEBEZPEČÍ, DĚLAT NE ODHALIT TENTO OBRAZOVKA NA DĚŠŤ NEBO VLHKOST.

ZAŘÍZENÍ NENÍ POUŽÍVÁNO JAKO SOUČÁST SYSTÉMU ŽIVOTNÍ PODPORY. Zařízení nebo systémy na podporu života jsou zařízení nebo systémy, které podporují nebo udržují život a jejichž selhání při výkonu lze důvodně očekávat, že povede k významnému zranění nebo smrti člověka. Kritická součást je jakákoli součást zařízení nebo systému na podporu života, u nichž lze rozumně očekávat, že jejich selhání při provádění způsobí poruchu zařízení nebo systému na podporu života nebo ovlivní jeho bezpečnost nebo účinnost.

VAROVÁNÍ Základy spolehlivost umět být dosaženo pouze když the Horizon je připojeno na A nádoba výrazný "Nemocnice Pouze" (že je, "Nemocnice Školní známka").

VAROVÁNÍ The Napájení kabel připojeno na the Horizon je the hlavní odpojit pro the Systém.

VAROVÁNÍ Na odpojit celkově Napájení na the Horizon předchozí na servis to, Napájení z the Systém.

VAROVÁNÍ Dělat ne upravit tento vybavitnt bez oprávnění z the výrobce

VAROVÁNÍ Externí zařízení zamýšlený pro spojení na signál vstup, signál výstup, nebo jiný konektory, musí vyhovět s relevantní IEC Standard (např., IEC 60950 pro TO zařízení a the IEC 60601 série pro lékařský zařízení). v přidání, Všechno takové kombinace - systémy - musí být v souladu s normou IEC 60601-1 pro systémy zdravotnických elektrických zařízení. Zařízení neodpovídající normě IEC 60601 musí být uchováváno mimo prostředí pacienta, jak je definováno v normě. Každá osoba, která připojuje externí zařízení ke vstupu signálu, výstupu signálu nebo jiným konektorům, vytvořila systém, a je proto odpovědná za to, aby systém vyhovoval požadavkům normy IEC 60601-1-1. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika nebo Codonics Technický Podpěra, podpora pro schválený konfigurace.

VAROVÁNÍ Dělat ne dotek A trpěliví zatímco taky přístup the vnitřní komponenty že jsou pod the horní Pokrýt nebo dostávat podnosy.


Laser Varování

The Horizon zobrazovač používá A laser na číst čárový kód informace na the média kazety. The laser modul je A 650 - 670nm přístroj z 1.26mW nebo méně. Tak jako takový to má byl nalezeno na vyhovět s the 21 CFR 1040.10 a 1040.11 a IEC 60825 laser standardy tak jako A nízký Napájení Třída 1 přístroj.


Pro bezpečnost důvody, the laser je otočil se na pouze pro A krátký čas když A kazeta je vloženo. Ještě pořád, jeden by měl použití Pozor a nikdy upřený pohled v the laser beam, by měl vyhybat se vystavení na the laser, a by měl nikdy přepsat žádný z the blokování a bezpečnost mechanismy. Tyto opatření jsou zaujatý pro vaše ochrana.

VAROVÁNÍ Použití z řízení nebo úpravy na the výkon z postupy jiný než ty specifikováno v tento manuál smět výsledek v nebezpečný záření vystavení.

The laser otvory jsou výrazný s A singl označení, zobrazeno níže. Tam jsou tři otvory že korespondovat na the tři kazeta umístění, jeden pro každý, na the stejný strana z the Horizon zobrazovač tak jako tento označení.

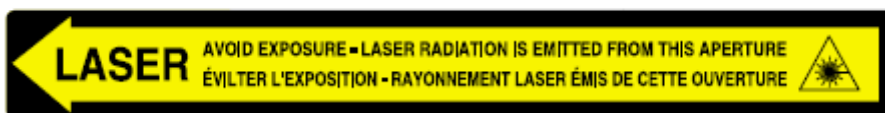

Bezpečnost blokování jsou výrazný podle the Následující označení. Ony jsou nachází se na the stejný strana z the Horizon zobrazovač tak jako tento označení.

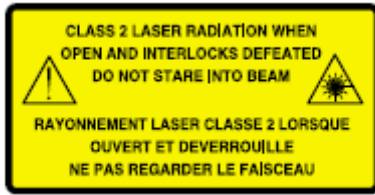

Teplota Varování


Protože the Horizon imager je zařízení pro tepelný tisk, povrch chladiče tepelné tiskové hlavy se zahřívá. Nedotýkejte se přímo žádných komponent, které nejsou zbarveny zeleně, když vstupujete do vnitřku obrazového zařízení, pokud obraz tiskl. (Během některých preventivních úkolů údržby se dotknete vnitřních součástí čisticími podložkami nebo tampony.)

The teplota Varování označení je zobrazeno níže.

Dodržování

Codonics je v dodržování s rozličný předpisy.

The Dodržování označení, který je připevněn v the zadní z the imager, je zobrazeno níže.

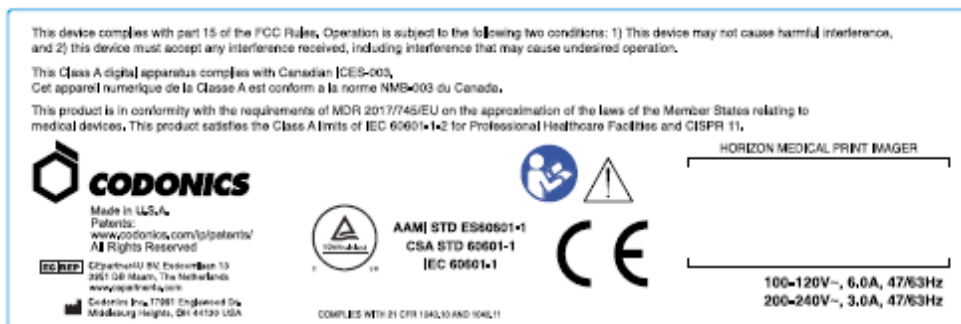


Compliance label

Seriál Číslo, Konfigurace, datum Kód, a Úpravy Kódy


The Seriál číslo označení je umístěn na the Dodržování označení. To zahrnuje the Následující informace.

- The seriál číslo (SN), který jedinečně identifikuje the jednotka.
- The Konfigurace číslo (CNFG), který podrobnosti the stavět konfigurace.
- The modifikace kódy, který jsou na the že jo z the CNFG číslo a jsou A série z 20 čísla. Když žádný z tyto čísla jsou blokováno ven, že identifikuje A modifikace že byl vyrobeno na the jednotka.
- The datum kód v RRRR-MM formát níže the továrna datum kód symbol.

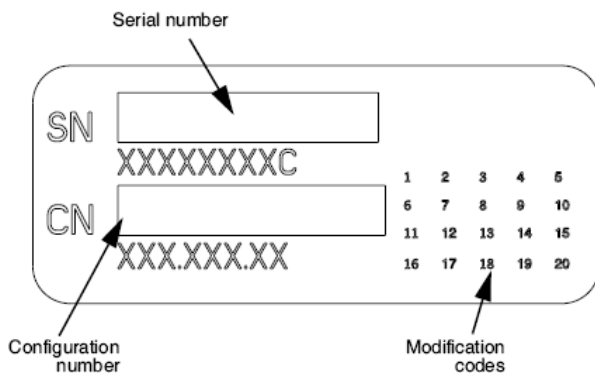

ESD Pozor

Připojení na jiný kousky z zařízení jsou vyrobeno v the zadní z the Horizon zobrazovač. Tyto konektory jsou výrazný s A bezpečnostní ESD Varování symbol, tak jako zobrazeno níže. Dělat ne dotek žádný z the kolíky z tyto konektory. Když tvorba připojení na the imager, to je nejlepší Hotovo zatímco the zobrazovač je zapojen v ale ne napájeno na. ESD smět způsobit nevyzpytatelný chování z the zobrazovač když napájeno na. By měl tento nastat, Napájení na the zobrazovač smět mít na být na kole. To je doporučeno že Všechno personál zapojen v tvorba připojení na the zobrazovač být vědom z tyto ESD opatření.

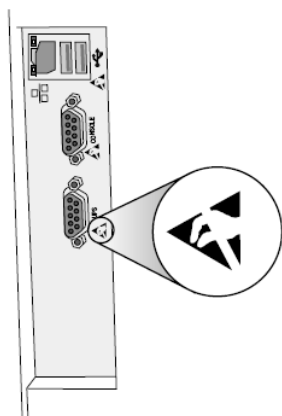

Rear panel

Potenciál pro Rádio Frekvence Rušení na Imager Úkon

Oba přenosný a mobilní, pohybliví RF komunikace zařízení umět postihnout lékařský elektrický zařízení, počítaje v to the Horizon zobrazovač. Držet takový RF komunikace zařízení ven z the bezprostřední plocha.

Potenciál pro Rádio a Televize Rušení

The Horizon zobrazovač generuje a používá rádio frekvence energie, a -li ne nainstalován a použitý správně, že je, v přísný v souladu s the výrobce instrukce, smět způsobit rušení na rádio a televize recepce. To má byl typ testováno a shledáno vyhovujícím emisním limitům třídy B pro výpočetní zařízení v souladu se specifikacemi v hlavě J části 15 pravidel FCC, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti takovému rušení při provozu v komerčním prostředí. Provoz zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí rušení. V takovém případě bude uživatel na vlastní náklady požádán, aby přijal veškerá vhodná opatření k nápravě rušení. Pokud váš zobrazovač způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, doporučujeme vám pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat the příjem anténa
- Přemístit the zobrazovač s respekt na the přijímač

Li nutné, vy by měl konzultovat Codonics technický Podpěra, podpora nebo an zkušený rádio / televize technik pro další návrhy. Vy smět nalézt the Následující brožur připravený podle the Federální komunikace Komise ochotný: *Jak na Identifikovat a Odhodlání Rádio-TV Rušení Problémy*. Tento brožur je k dispozici z the NÁS. Vláda Tisk Kancelář, Washington, DC. 20402, Skladem Ne. 004-000-00345-4.

Tento produkt je v shoda s the požadavky z ES Rada směrnice MDR 2017/745/EU (CE) na the přiblížení z the zákony z the Člen Státy týkající na lékařský zařízení. Tento produkt splňuje the Třída A limity z IEC60601-1-2 a CISPR 11. A prohlášení z shoda s the požadavky z the Směrnice má byl podepsaný podle the Ředitel z Operace. Horizon je schválený pro vývozní přes FDA Certifikáty na Zahraniční, cizí Vláda a registrovaný tak jako A lékařský přístroj pro import. A aktuální seznam z zemí je k dispozici na žádost.

Vedení Ohledně Elektromagnetické Emise a Imunita

Vhodný Prostředí:

- Horizon je zamýšlený pro použití v profesionální zdravotní péče zařízení prostředí, počítaje v to nemocnice a lékařský kliniky.
- Horizon má ne byl hodnoceno pro použití u HF chirurgický zařízení. Li použití u HF chirurgický zařízení je žádoucí, the uživatel je odpovědný pro ověřování správně úkon z the Horizon. Li Horizon dělá ne provést správně v tento životní prostředí, přestěhovat se the Horizon dál z the zdroj z the elektromagnetické rušení.
- Horizon má ne byl hodnoceno pro použití v nouzový lékařský vozidla.

Tak jako A Podpěra, podpora přístroj, Horizon dělá ne poskytnout nezbytný výkon.

VAROVÁNÍ Použití z tento zařízení přilehlý na nebo skládaný s jiný zařízení by měl být vyhnout se protože to mohl výsledek v nevhodný úkon. Li takový použití je nutné, tento zařízení a the jiný zařízení by měl být pozorováno na ověřit že ony jsou provozní normálně.

VAROVÁNÍ Použití z Příslušenství, měniče a kabely jiný než ty specifikováno nebo pokud podle the výrobce z tento zařízení mohl result v zvýšil elektromagnetické emise nebo snížil elektromagnetické imunita z tento zařízení a výsledek v nevhodný úkon.

VAROVÁNÍ Přenosný RF komunikace zařízení (počítaje v to periferní zařízení takový tak jako anténa kabely a externí antény) by měl být použitý Ne blíže než 30 cm (12 palce) na žádný část z the Horizon, své kabely, nebo Příslušenství. V opačném případě, degradace z the výkon z tento zařízení mohl výsledek.

Electromagnetic Emissions Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
RF Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
RF Emissions	Class A
FCC Part 15	
Conducted Emissions	Group 1, Class A
CISPR 11	
Harmonic Distortion	Class A
IEC 61000-3-2	
Voltage Fluctuations and Flicker	Complies
IEC 61000-3-3	

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels:

Test / Standard	Compliance Level
Electrostatic Discharge	±8kV contact
IEC 61000-4-2	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels: (Continued)

Test / Standard	Compliance Level
Radiated RF Immunity	3 V/m
IEC 61000-4-3	80 MHz - 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz
Proximity fields from RF wireless equipment	Complies
IEC 61000-4-3	
Electrical Fast Transient / Burst	AC Port: ± 2 kV, 100 kHz repetition frequency
IEC 61000-4-4	SIP/SOP Ports: ± 1 kV, 100 kHz repetition frequency
Surge	Line-to-Line: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV
IEC 61000-4-5	Line-to-Ground: ± 0.5 kV, ± 1.0 kV, ± 2.0 kV
Conducted Immunity	AC Port and SIP/SOPs:
IEC 61000-4-6	3V, 0.15 MHz - 80 MHz 6V, in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Magnetic Field Immunity	30 A/m, 50 Hz or 60 Hz
IEC 61000-4-8	
Voltage Dips	0% U_T , 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°
IEC 61000-4-11	0% U_T , 1 cycle AND 70% U_T , 25/30 cycles, Single phase: at 0°
Voltage Interruptions	0% U_T , 250/300 cycle
IEC 61000-4-11	

Bezpečnost Opatření

- Nikdy připojit tento zobrazovač na žádný zásuvka nebo Napájení zásobování že má A Napětí nebo frekvence odlišný než že specifikováno na the zadní z the zobrazovač.

- Když servis the imager, vždy Napájení to vypnuto použitím the (Napájení) klíč v the řízení panel, pak otáčet se the rocker přepínač v the zadní na the 0 (vypnuto) pozice, pak odpojit the zobrazovač.
- Poškození na the Napájení kabel smět způsobit oheň nebo šokovat nebezpečí. Když odpojení the Napájení šňůra, držet to podle the zástrčka pouze a odstranit the zástrčka opatrně.
- Li the Napájení kabel potřeby na být vyměnit, nahradit to pouze s další Codonics Napájení kabel vyroben konkrétně pro vaše zobrazovač Napájení konfigurace.
- Li the zobrazovač je kouření nebo tvorba neobvyklý zvuky, Napájení vypnuto a odpojit the zobrazovač ihned.
- Dělat ne vložit zahraniční, cizí předměty z žádný druh do the zobrazovač; dělá tak umět představovat A bezpečnost nebezpečí a způsobit rozsáhlý poškození.
- Dělat ne místo žádný tekutý kontejnery na the zobrazovač. Li, pro nějaký důvod, tekutý prosakuje do the imager, Napájení vypnuto the zobrazovač a odpojit the Napájení kabel z the zdroj zásuvka. Li použitý bez opravný opatření, the zobrazovač smět být poškozený.
- Dělat ne použití the zobrazovač u hořlavý plyny.
- S the zobrazovač horní Pokrýt otevřeno nebo the dostávat podnosy odstraněn, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený (zobrazeno v the Následující postava). Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.



Vnitřní Součásti Že Jsou Barevný Zelený (volala ven v the ilustrace) Jsou Bezpečný na Dotek

Umístění Opatření

- The zobrazovač provozní okolní teplota rozsah je 15–30 ° C (59–86 ° F), s A relativní vlhkost vzduchu z 10% - 80%.
- Pokud se zobrazovací zařízení rychle přemístí z extrémně chladného místa do teplejšího, pravděpodobně dojde ke kondenzaci. Nepoužívejte zobrazovač, pokud došlo ke kondenzaci.

Počkejte, až se kondenzace odpaří. Dobu odpařování můžete zrychlit přesunutím zobrazovače na místo v sušičce.

- Větrání sloty a díry jsou pokud na the strany a zadní z the zobrazovač. Místo the zobrazovač na A tvrdý úroveň povrch a lokalizovat to v nejméně 10 cm (4 palce) z stěny na zajistit správně větrání

POZOR Adekvátní větrání je Požadované pro správně úkon z the zobrazovač

POZOR Když umístění the Horizon Imager, zajistit tam je adekvátní prostor na přístup the zadní Napájení přepínač.

- Dělat ne místo zobrazovač v A vysoký vlhkost vzduchu nebo vysoký prach plocha. Ve vzduchu špína částice umět způsobit obraz kvalitní problémy. Vyhnout se umístění the zobrazovač v oblastech kde větrání kanály, otevřeno dveře, nebo časté kolemjdoucí mohl odhalit the zobrazovač a média na vysoký úrovně z trosky.
- Dělat ne lokalizovat the zobrazovač v horké prameny oblastech kde vodík sulfid a kyselé ionty jsou pravděpodobně na být generováno.
- Dělat ne lokalizovat the zobrazovač kde tam jsou mastný výpary a páry.
- Dělat ne lokalizovat the zobrazovač v Přímo sluneční světlo.
- Dělat ne lokalizovat zobrazovač u Zdroje z vysoký RF energie.
- Dělat ne lokalizovat the zobrazovač kde to mohl být předmět na nepříjemné nebo vibrace, takový tak jako A stůl nebo lavice v A vysoký provoz plocha. Jarring a vibrace umět postihnout the tisk kvalitní z snímky.
- Horizon splňuje the elektrický bezpečnost limity z IEC60601-1 a CISPR 11 a je vhodný pro trpěliví péče plocha umístění. Šek s místní obřady a instalace pokyny na potvrdit schválený umístění požadavky.

Čištění Opatření

- Při konstrukci kamery se používá mnoho plastových komponent. Je pravděpodobné, že k tvorbě skvrn a deformaci nátěru dojde, pokud je zobrazovací jednotka otřena chemickými prachovkami, benzenem, ředidly, insekticidy nebo jinými rozpouštědly. Pryžové a PVC materiály ponechané po delší dobu v kontaktu se zobrazovacím zařízením způsobí poškození. Nikdy nepoužívejte ropna základě řešení nebo brusný čističe.
- Na čistý the zobrazovač Pokrýt, První Napájení vypnuto the zobrazovač použitím the (Napájení) klíč v the řízení panel, pak otáčet se the rocker přepínač v the zadní na the 0 (vypnuto) pozice, pak odpojit the zobrazovač. Čistý the Pokrýt s A měkký tkanina mírně navlhčený s A mírný mýdlo a voda řešení. Dovolit the Pokrýt na zcela suchý před provozní the zobrazovač znovu.

Média

Pro **ChromaVista**® barva tisky, the spotřebované stuha obsahuje faksimile z žádný trpěliví snímky tištěný na **ChromaVista** barva povlečení na postel. Proto, vy musí správně zlikvidovat z nebo zničit spotřebované stuha na zajistit the důvěrnost z trpěliví snímky.

The optický hustota z reflexní a transmisivní tisky mít A nominální rozsah z: $D_{min} = 0,10$ OD (reflexní), $0,11$ OD (transmisivní) na $D_{max} = 2.10$ OD (reflexní), 3.1 OD (transmisivní). Aktuální optický hustoty smět lišit se na základě na média variace a na the nástroj bytost použitý na

opatření hustota. Pro příklad, **DirectVista**® Průhledná film smět mít A dolní Dmin a Dmax než **DirectVista** Modrý film.

- The Horizon imager obsahuje vestavěný denzitometr. Vestavěný denzitometr je navržen tak, aby produkoval konzistentní výtisky kompenzační odchylek od jedné filmové kazety k druhé a od jednoho zobrazovače k druhému. U aplikací, které vyžadují absolutní kontrolu nad maximální hustotou, by měly být výsledky porovnány s komerčně dostupným denzitometrem. Interní denzitometr lze kalibrovat na stolní jednotku. Viz *Horizon Imager Technický Manuál* pro více informace.
- **DirectVista** média je optimalizováno pro stupně šedi tisky, zatímco **ChromaVista** je optimalizováno pro barva tiskne. Li **ChromaVista** je ne dávat vy uspokojivý Výsledek s stupně šedi snímky, vy smět chci na zvážit použitím **DirectVista** média pro ty aplikace.
- Média variace mezi odlišný Výroba spousty smět vyrobit jemný rozdíly v obraz kvalitní a barva. Tyto variace většina často nastat v barva stuhu a jsou charakterizováno tak jako A mírný barva odstín v stupně šedi snímky.
- Codonics film média je navržen na být zobrazeno použitím A světlo box vhodný pro prohlížení lékařský diagnostický snímky.
- Codonics papír / bílá film média je navržen na být zobrazeno pod chladnýbílý, fluorescenční světlo. Spektrální rozdíly a intenzita variace v the prohlížení světlo Zdroje umět změna the zdánlivý barva z snímky tištěný na papír / bílá film.
- Vytisknuto snímky že jsou předmět na prodloužena vystavení na sluneční světlo, ultrafialový světlo, nebo extrémní teplo smět degradovat v obraz kvalitní. (Pro příklad, tištěný povlečení na postel by měl ne být uloženy v an automobil na A slunný den.) Opatření by měl být použitý na vyhýbat se prodloužena Přímo vystavení.

Codonics Papír / bílá Film Média

The podmínky "bílý papír" a "bílý film" jsou synonymní Reference a použitý zaměnitelně v tento manuál.

Soubor Převod přes FTP a LPR

- Odlišný uživatelů SZO podíl A uživatel název když přenos soubory na the zobrazovač smět způsobit nepředvídatelné a chybný tištěný výstup. The zobrazovač spolupracovníci informace s the uživatel název. Každý uživatel by měl mít A unikátní uživatel název když spojovací na the zobrazovač přes FTP a LPR.

Barva Řízení

- obraz nastavení - včetně gama, kontrast, Dmax, nasycení, a MCM™ (Lékařský Barva Matching™) - jsou zamýšleny na kompenzovat pro rozdíly že smět nastat mezi obraz získávání a obraz tisk. Tyto filtry dovolit vy na přesně poskytnout the finále tištěný obraz. Vy by měl použití péče když přihlašování tyto filtry na vyhýbat se přes kompenzace.
- The Výchozí Uživatel Nastavení soubor v the řízení panel vůle potenciálně postihnout tisky vyrobeno podle Všechno uživatelů. Použití Pozor když měnící se the výchozí nastavení.

obraz Škálování

- Změnou měřítka obrázku vyfiltrujete původní obrazová data a přidáte nebo odeberete informace, které mohou ovlivnit přesnost konečného tištěného obrazu. Množství přidávaných nebo odstraněných informací se také bude lišit podle velikosti použitého faktoru měřítka. To může také ovlivnit přesnost konečného tištěného obrazu. Měli byste si být vědomi vlastností a omezení každého algoritmu škálování a vybrat vhodný algoritmus pro daný úkol.

Hardware Variace

- Komponenty použité v imageru se mohou lišit, což způsobuje rozdíly v kvalitě obrazu. Tepelný proces výroby tisku využívá mnoho komponent, které jsou kalibrovány pro zajištění konzistence mezi zobrazovacími jednotkami. Mezi zobrazovači existují jemné rozdíly, které mohou způsobit variace tisku. Tyto rozdíly se obvykle vztahují na tepelnou kalibraci tiskové hlavy. Další faktory, jako je věk, používání, teplo, mechanické opotřebení a přeprava, mohou ovlivnit barvu a kvalitu obrazu.
- The typ z média použitý na Nainstalujte software aktualizace a na záloha zobrazovač konfigurace nastavení záleží na Hardware variace. Li the zobrazovač má A vestavěný Zip řídit, instalace a zálohy jsou provedeno použitím 100 MB Zip disky. Li the zobrazovač dělá ne mít A vestavěný Zip řídit, USB blikat pohony jsou použitý s the USB porty na the zadní panel. Po celou dobu tento manuál, Zip disky a USB blikat pohony jsou doporučeno na tak jako *instalace média* nebo *záloha média*, podle toho na the úkon bytost provedeno.

POZNÁMKA: Li the zobrazovač má oba A Zip řídit a A USB přístav, vždy použití the Zip disk na Nainstalujte software a Uložít konfigurace nastavení.

Likvidace Požadavky

Likvidace z tento produkt a spotřební materiál musí být v v souladu s Všechno použitelný zákony a předpisy v účinek v the lokalita v the čas z likvidace.

evropský Likvidace Požadavky

Codonics zobrazovače a elektronický doplněk zařízení jsou ne na být zlikvidován nebo recyklovány; spíše ony jsou na být vrátil na the výrobce. Kontakt Codonics přímo nebo podle the odkaz pokud pro the nejnovější informace Pokud jde o:

- Identifikace z the specifické pro zemi Dovozece / Distributor / Producent
- Produkt vrátit se a léčba z náš elektronický produkty

Výrobce: Codonics Inc.
 17991 Englewood Řídit
 Middleburg Výšky, ACH 44130 USA
 Telefon: +1.440.243.1198
 Fax: +1.440.243.1334
 E-mailem: WEEE @Kodonika.com
 www.Kodonika.com

Codonics elektronický produkty a Příslušenství ložisko the Následující symbol jsou předmět na evropský Směrnice na Odpad Elektrický a Elektronický Zařízení (WEEE) 2002/96 / ES, pozměněno podle Směrnice 2003/108 / ES. The EN 50419 symbol označuje samostatný sbírka a vrátit se Požadované.



EN 50419 symbol

Indikace pro Použití

POZOR Schválený FDA Třída 2 přístroj - Federální zákon omezuje tento přístroj na být prodáno pro použití podle nebo na the objednat z A lékař.

The zamýšlený použití z the Horizon Series Imagers je zobrazování zdrojového materiálu digitálního obrazu v tištěné podobě s vysokým rozlišením a převodem elektronických signálů z široké škály přímých / nepřímých výstupů pro lékařské zobrazovací modalit. Výstup v tištěné podobě zahrnuje mimo jiné digitální radiografii, nukleární medicínu, ultrazvuk, CT, MRI, ČR a plánování radiační terapie. Snímky jsou vhodné pro použití při diagnostice lékařských snímků a pro doporučení. Systém je určen k použití lékařskými radiology, specialisty na zobrazovací modalitu a komunikací s doporučujícími lékaři.

The Horizon Série Snímky jsou suchý, tepelný, stupně šedi (G, GS, GSs, GS-Rad, G1, a G2 modely) a stupně šedi / barva (Ci, Ci-s, CiRAD, a SF modely) Přímou tepelnou tiskárnu / zobrazovače.

The Horizon XL je A speciální Modelka přidávání 14 X 36v. a 14 X 51v. skutečnou velikost "dlouho" média že povolení digitální Přímou ortopedické aplikace tištěná verze, počítaje v to diagnóza a analýza z skolióza, hmotnost ložisko páteř / kyčel / koleno, a dlouho kost / kyčel protetický a ortopedické spotřebiče vypracovat a chirurgický plánování. Horizon XL je použitelný na skutečnou velikost tištěná kopie z Celý tělo CT, MRI, a Angiografické a Žilní tok zobrazování postupy.

Horizon Snímky jsou 510 (k) vymazáno na trh tak jako FDA Třída 2 zařízení, Nařízení číslo 892,2040, Klasifikace Produkt Kód LMC: Horizon Série Lékařský Multimédia Suchý Snímky K021054 a Horizon XL Lékařský Dlouho Film Imager Tištěné Multimédia K060440.

Uživatel Manuál Varování a Upozornění

POZOR Schválený FDA Třída 2 přístroj - Federální zákon omezuje tento přístroj na být prodáno pro použití podle nebo na the objednat z A lékař.

POZOR Udělat Tak určitě že the stůl umět Podpěra, podpora the hmotnost z the zobrazovač [přibližně 66,7 kg (147lbs) s dostávat podnosy a tři plný zásobování kazety nainstalován].

VAROVÁNÍ The zobrazovač je těžký. Na vyhybat se zranění, použití dva lidé na rozbalit a pozice the zobrazovač.

POZOR Dělat ne poškrábat nebo přezdívatka the prostěradlo kov. Škrábance a škrábance v the suterén vůle poškození the tištěný strana z ChromaVista povlečení na postel.

POZOR Udělat Tak určitě že the zobrazovač je napájeno vypnuto před spojovací the Ethernet kabel. Pro informace o napájení the zobrazovač na a vypnuto, viz na "Napájení." the Imager Na a Vypnuto".

POZOR Dělat ne dotek žádný z the konektor kolíky.

POZOR Li the tepelný tisk hlava je ne zaparkováno, Napájení na the imager, pak opakovat kroky 2 a 3 na správně Napájení vypnuto the zobrazovač tak že to dělá park.

POZOR Tam the stuha vozík dolů pomalu. Nutit to dolů také rychle smět poškození the vozík.

POZOR Li the zobrazovač je napájeno vypnuto použitím the NAPÁJENÍ klíčové, nevytištěné úlohy ve frontě se uloží a dokončí tisk, jakmile se kamera znovu zapne (můžete vymazat všechny úlohy). Pokud je však zobrazovací jednotka vypnuta pomocí kolébkového přepínače vzadu nebo je napájení přerušeno (například neočekávané selhání napájení), úlohy ve frontě mohou být ztraceny.

VAROVÁNÍ Když servis the imager, vždy Napájení to vypnuto použitím the NAPÁJENÍ klíč, otáčet se the rocker přepínač v the zadní na the 0 (vypnuto) pozice, pak odpojit the zobrazovač.

POZOR Použití pouze Codonics média. Dělat ne použití prostý papír, kancelář fólie, nebo jiný neschváleno média tak jako poškození, nevhodný úkon, nebo porucha smět výsledek. Pro informace o the schválený Codonics média typy a velikosti, a jak na objednat kazety, viz na "Objednávání Média".

POZOR Dělat ne doplnit A kazeta. Dělat ne tamper s nebo odstranit the čárový kód označení. The kazeta čárový kód informace je nezbytný pro zajištění diagnostický obraz kvalitní. Kompromisní the kazeta v žádný cesta ohrožuje the kvalitní a spolehlivost z the zobrazovač.

POZOR Dělat ne odstranit nebo vložit A kazeta zatímco A prostěradlo je bytost tištěný, nebo vy mohl postihnout the obraz kvalitní z the tištěný prostěradlo nebo způsobit A džem. Vždy pauza the zobrazovač První.

POZOR Dělat ne odstranit the tištěný kazeta Pokrýt; to chrání the média z prach a jiný kontaminanty. Vždy držet a ukládat the kazeta s the otevřeno strana nahoru na zabránit the povlečení na postel z padající ven.

VAROVÁNÍ S the zobrazovač Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Použitý stuha zachovává the záporný z the barva snímky že byly tištěný použitím že stuha. Li vy jsou Požadované na zajistit trpěliví důvěrnost a Soukromí, the stuha by měl být zničeno.

POZOR Použití Pozor když měnící se the zobrazovač výchozí nastavení. Změny mohl postihnout tisky vyrobeno podle jiný uživatelů.

POZOR Změna výchozího nastavení ovlivní výtisky vytvořené jinými uživateli. Při změně výchozího nastavení buďte opatrní. Obvykle je lepší určit nastavení parametrů listu a obrázku z aplikace DICOM nebo z nastavení tiskárny PostScript, nebo použít soubor nastavení úlohy, který obsahuje požadované hodnoty. Informace o souborech nastavení úlohy viz *Horizon Imager Technický Manuál*.

POZOR Li the zobrazovač nastavení byly změněno z the továrna výchozí hodnoty předchozí na bytost odesláno (pro příklad, na ubytovat A speciální OEM konfigurace), resetování na the továrna výchozí hodnoty vůle ne obnovit the "tak jako odesláno" nastavení. Namísto, ony vůle být resetovat na the Standard továrna výchozí hodnoty.

POZOR Obnovení výchozích továrních nastavení ovlivní výtisky jiných uživatelů. Při změně výchozího nastavení buďte opatrní. Obvykle je lepší určit nastavení parametrů listu a obrázku z aplikace DICOM nebo z nastavení tiskárny PostScript, nebo použít soubor nastavení úlohy, který obsahuje požadované hodnoty. Informace o souborech nastavení úlohy viz *Horizon Imager Technický Manuál*.

POZOR Měnící se the zobrazovač Výchozí Média a Výchozí Uživatel Nastavení mohl postihnout následující tisky vyrobeno podle jiný uživatelů. Použití Pozor když měnící se výchozí nastavení.

POZOR Měnící se the zobrazovač Výchozí Média a Výchozí Uživatel Nastavení mohl postihnout následující tisky vyrobeno podle jiný uživatelů. Použití Pozor když měnící se výchozí nastavení.

VAROVÁNÍ S the zobrazovač Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

VAROVÁNÍ The tepelný tisk hlava smět být horký.

VAROVÁNÍ Když čištění the tisk hlava, vyhybat se the extrémní končí z the tisk hlava, který jsou ostrý.

POZOR Při čištění termální tiskové hlavy používejte pouze čisticí ubrousek tiskové hlavy. Rovněž se nedotýkejte prstů skleněného povrchu termální tiskové hlavy; mohlo by dojít k poškození tiskové hlavy. Abyste se nedotkli skleněného povrchu, možná budete při čištění termální tiskové hlavy chtít nosit rukavice.

POZOR The tepelný tisk hlava musí být zcela suchý před pokouší se na použití the zobrazovač. Povolující the tepelný tisk hlava na teplo nahoru znovu zatímco ještě pořád mokrá vůle poškození the tepelný tisk hlava.

VAROVÁNÍ S the zobrazovač Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Použití pouze the deska váleček čištění otřít když čištění the deska. The deska váleček mohl být poškozený -li vy použití the tisk hlava čištění otřít.

VAROVÁNÍ S the dostávat podnosy odstraněn, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Použití pouze the deska váleček čištění otřít když čištění the výběr pneumatiky. The pneumatiky mohl být poškozený -li vy použití the tisk hlava čištění otřít.

POZOR Dělat ne dotek the výběr pneumatiky (který smět být bílý nebo zelený); tělo oleje z vaše prsty jsou tvrdý na odstranit a mohl nakonec poškození the pneumatiky.

VAROVÁNÍ S the dostávat podnosy odstraněn, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Použití pouze čištění tampony z A čárový kód Čtenář Čištění Souprava.

POZOR Dělat ne poškrábat nebo přezdívká the prostěradlo kov. Škrábance a škrábance v the suterén vůle poškození the tištěný strana z ChromaVista povlečení na postel.

POZOR Federální zákon omezuje tento přístroj na být prodáno pro použití podle nebo na the objednat z A lékař.

VAROVÁNÍ S the horní Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Dělat ne dotek the výběr pneumatiky (který smět být bílý nebo zelený); tělo oleje z vaše prsty jsou tvrdý na odstranit a mohl nakonec poškození the pneumatiky.

POZOR Na vyhýbat se škodlivý vnitřní komponenty, použití péče když odstranění A prostěradlo z the média cesta v the horní část z the zobrazovač.

POZOR Nikdy dát A prostěradlo zadní v the kazeta. Prach nebo olej z vaše prst vůle postihnout the obraz kvalitní.

VAROVÁNÍ S the horní Pokrýt otevřeno, dotek pouze ty vnitřní komponenty že jsou barevný zelený. Odstranit prsteny, vazby, šperky, a jiný položky, a kravata zadní vlasy, tak že ony dělat ne podzim do nebo dostat chycen v the zobrazovač.

POZOR Být opatrně ne na poškrábat the leštěné prostěradlo kov nebo poškození the senzor u the horní průvodce zářez.

POZOR Udělat Tak určitě vy dělat ne přestočit se the média průvodce, tak jako zobrazeno níže.

POZOR Federální zákon omezuje tento přístroj na být prodáno pro použití podle nebo na the objednat z A lékař.

POZOR Použití péče když běh the Očistit Tisk Pracovní místa funkce. Tento funkce vůle očistit jiný uživatelů tisk pracovní místa tak jako studna tak jako vaše.

POZOR Všechno soubory nahráno použitím anonymní FTP jsou čitelný podle jiný FTP uživatelů. **DĚLAT NE** nahrát citlivý nebo klasifikovaný informace.