

Imageur Horizon® - Instructions pour le nettoyage de l'appareil

Fiche technique

Le kit de nettoyage de l'imageur Horizon contient deux types de lingettes imprégnées d'alcool permettant de nettoyer certains composants internes de l'imageur multimédia à sec Horizon. Cette fiche technique explique les procédures d'utilisation des lingettes nettoyantes. Effectuez ces procédures de nettoyage dans le cadre de la maintenance habituelle de l'appareil ou lorsque vous constatez une diminution notable de la qualité de l'image ou des performances d'impression. Reportez-vous au *Manuel d'utilisation de l'imageur Horizon* ou au *Manuel de démarrage Horizon* pour en savoir plus sur les intervalles de maintenance recommandés et pour obtenir de plus amples informations sur le dépannage de l'appareil.

Certains utilisateurs Horizon peuvent préférer utiliser la cassette de nettoyage Horizon pour nettoyer les patins d'entraînement, plutôt que d'utiliser la lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine). La cassette de nettoyage Horizon, référence SP-00279, peut être commandée auprès de votre représentant Codonics.

Nettoyage de la tête d'impression thermique et du rouleau de platine


1. Appuyez sur la touche **MENU** de l'imageur.
Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
2. Sélectionnez l'option de menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur).
L'imageur passe en mode pause et le couvercle supérieur s'entrouvre au bout d'une minute (ce délai est nécessaire pour permettre aux composants internes de refroidir).
3. Ouvrez complètement le couvercle supérieur.

AVERTISSEMENT : Une fois le couvercle de l'imageur ouvert, ne touchez que les composants internes de couleur verte (à l'exception des patins d'entraînement). Retirez vos bagues, cravates, bijoux et autres effets personnels de ce type, et attachez vos cheveux, de manière à ce qu'aucun corps étranger ne puisse tomber ou se coincer dans l'imageur.

Si un ruban encreur est chargé, passez à l'étape 4. Sinon, allez directement à l'étape 7.

4. Retirez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure suivante.

Remarque : Veillez à protéger le ruban de la poussière ou de la saleté lorsque celui-ci n'est pas chargé dans l'imageur. Évitez de déposer le ruban sur une table, sans quoi l'électricité statique de celui-ci risque d'attirer la poussière du plateau de la table.

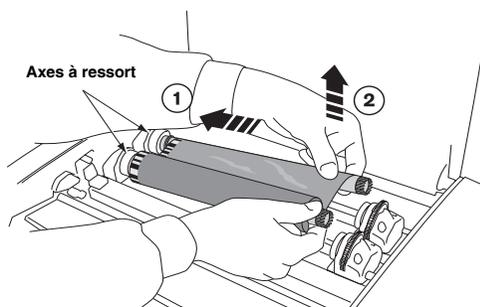

5. Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur), sélectionnez l'option Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du ruban).


6. Appuyez sur la touche **↻** pour déplacer le chariot du ruban vers le bas et le dégager de votre espace de travail.
7. Localisez la baguette d'impression et l'embout illustrés dans la figure ci-dessous.

ATTENTION : Pour éviter tout dommage à la tête d'impression thermique :


- n'utilisez que les lingettes nettoyantes pour PRINT HEAD (Tête d'impression) lors du nettoyage ;
- ne touchez pas la surface vitrée de la tête d'impression thermique avec les doigts. Il est recommandé de porter des gants.

AVERTISSEMENT : Il se peut que la tête d'impression thermique soit chaude.

Essuyez précautionneusement la baguette d'impression jusqu'à ce qu'elle soit propre.

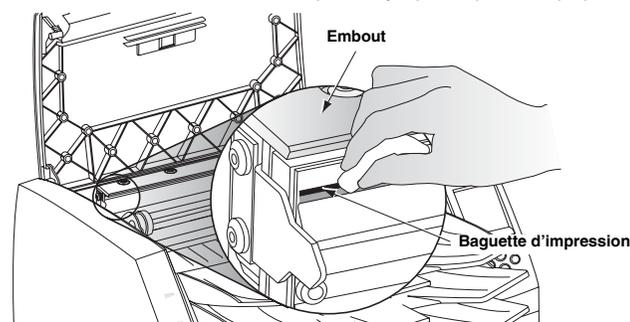

8. À l'aide des lingettes nettoyantes pour PRINT HEAD (Tête d'impression) fournies dans le kit de nettoyage de l'imageur, essuyez précautionneusement toute la longueur de la baguette d'impression en effectuant des mouvements de va-et-vient et en exerçant une pression modérée. Il se peut que la lingette nettoyante se décolore. Répétez ce mouvement d'aller-retour jusqu'à ce que la baguette d'impression soit complètement propre.
9. Éliminez toutes les poussières et tous les autres contaminants de l'embout.
10. En regardant depuis le côté de l'imageur, localisez le rouleau de platine orange ou blanc ainsi que le guide donneur illustrés dans la figure ci-dessous.

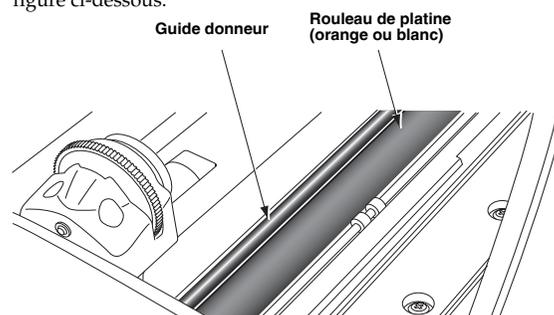

11. Si le menu Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du ruban encreur) est affiché, appuyez sur la touche **↻** pour retourner au menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur).
12. Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur), sélectionnez l'option Rotate Platen (Faire pivoter la platine). Le menu Rotate Platen (Faire pivoter la platine) s'affiche.

- Utilisez la lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) fournie dans le kit de nettoyage de l'imageur et passez-la sur toute la longueur du rouleau de platine, d'une extrémité à l'autre, jusqu'à ce que tous les contaminants visibles aient disparu. N'effectuez pas de mouvements de va-et-vient ; ne passez la lingette que dans un seul sens !

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire pivoter le rouleau de platine par incrément de manière à pouvoir nettoyer l'ensemble de sa surface.


ATTENTION : N'utilisez que les lingettes nettoyantes pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) lors du nettoyage du rouleau de platine. Si vous utilisez des lingettes pour PRINT HEAD (Tête d'impression), vous risquez d'endommager le rouleau de la platine.

- Éliminez la poussière et autres contaminants du guide donneur à l'aide d'une lingette pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) ou pour PRINT HEAD (Tête d'impression) fournie dans le kit de nettoyage de l'imageur.
- Patiencez le temps que la tête d'impression thermique et le rouleau de platine sèchent complètement.

ATTENTION : La tête d'impression thermique doit être complètement sèche avant toute utilisation de l'imageur. Si la tête chauffe alors qu'elle est encore humide, elle risque de s'endommager.

Si vous devez recharger le ruban encreur, passez au point 16. Sinon, allez directement au point 18.

- Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur), sélectionnez l'option Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du ruban). Appuyez sur la touche ▲ pour faire monter le chariot à une hauteur vous permettant de recharger le ruban encreur.
- Rechargez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure suivante.

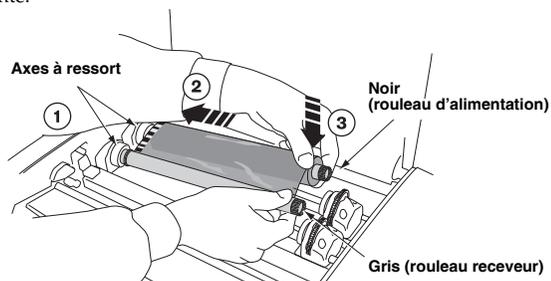


- Fermez le couvercle supérieur.


Nettoyage des patins d'entraînement

- Appuyez sur la touche **PAUSE** de l'imageur et attendez qu'il passe en mode pause.
- Retirez les plateaux de réception de la manière illustrée dans la figure suivante.

AVERTISSEMENT : Une fois les plateaux de réception retirés, ne touchez que les composants internes de couleur verte (à l'exception des patins d'entraînement). Retirez vos bagues, cravates, bijoux et autres effets personnels de ce type, et attachez vos cheveux, de manière à ce qu'aucun corps étranger ne puisse tomber ou se coincer dans l'imageur.

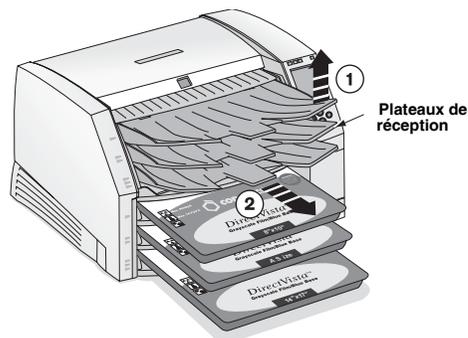


- Placez les plateaux de réception sur une surface plane de la manière illustrée dans la figure suivante.

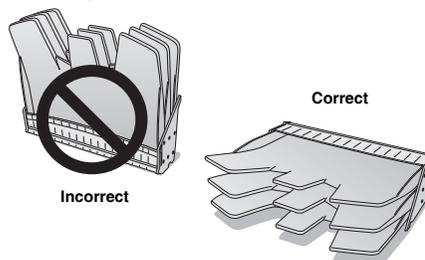

- Retirez toute cassette éventuelle des emplacements d'alimentation.
- Repérez les patins d'entraînement.

Les dispositifs d'entraînement sont au nombre de trois, un par emplacement d'alimentation. Le dispositif de décollement supérieur est illustré dans la figure suivante.

Patin d'entraînement

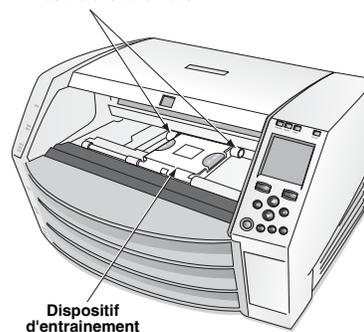

Dispositif d'entraînement

- Essuyez autour de chaque patin d'entraînement à l'aide d'une lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) fournie dans le kit de nettoyage de l'imageur. Il se peut que la lingette nettoyante se décolore.

ATTENTION : Ne touchez pas les patins d'entraînement avec les doigts ; le film gras présent sur les doigts est difficile à retirer et pourrait endommager les patins à terme. N'utilisez que les lingettes pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine). Si vous utilisez des lingettes pour PRINT HEAD (Tête d'impression), vous risquez d'endommager les composants.

- Patiencez le temps que les patins de décollement sèchent complètement.
- Remplacez les plateaux de réception et les cassettes de papier que vous avez retirés, le cas échéant.



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPON
Téléphone : 81-3-5730-2297
Fax : 81-3-5730-2295