

Riproduttore di immagini Horizon®

Istruzioni per la pulizia

**Compendio
tecnico**

Il Kit di pulizia per il riproduttore di immagini Horizon comprende due tipi di fazzolettini imbevuti di alcool per la pulizia di alcuni componenti interni del Multi-media Dry Imager Horizon. Le presenti istruzioni tecniche spiegano le procedure per l'utilizzo dei fazzolettini per la pulizia.

Queste procedure di pulizia devono essere effettuate nell'ambito della regolare manutenzione o quando si verifica un degrado notevole della qualità delle immagini o della stampa. Vedere il *Manuale utente del riproduttore di immagini Horizon* o il *Manuale d'avviamento Horizon* per il Programma di manutenzione raccomandato e le Tabelle di risoluzione dei problemi.

Alcuni utenti Horizon potrebbero preferire la Cassetta di pulizia Horizon per pulire le rotelline di presa, invece di usare il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo). La Cassetta di pulizia Horizon, codice SP-00279, può essere ordinata contattando il proprio rappresentante Codonics.

Pulizia della testina di stampa termica e del rullo

1. Premere il tasto **MENU** sul riproduttore di immagini. Verrà visualizzato il Main Menu (Menu principale).
2. Selezionare l'opzione di menu Open Top Cover (Apri protezione superiore).

Il riproduttore di immagini entrerà in pausa e, dopo un minuto di attesa per consentire il raffreddamento dei componenti interni, la protezione superiore si aprirà parzialmente.


3. Aprire completamente la protezione superiore.

ATTENZIONE Quando la protezione del riproduttore d'immagini è aperta, toccare solo i componenti interni di colore verde (ad eccezione delle rotelline di presa). Non indossare anelli, cravatte, gioielli e altri oggetti, e raccogliere i capelli in modo che non possano cadere o rimanere incastrati nel riproduttore di immagini.

Se è caricato un nastro a colori, passare al punto 4. Altrimenti andare al punto 7.

4. Rimuovere il nastro a colori, come mostrato nella seguente figura.

Nota: è necessario proteggere il nastro dalla polvere e dallo sporco quando non è caricato nel riproduttore di immagini. Evitare di appoggiare il nastro su un tavolo; l'elettricità statica potrebbe attirare la polvere dal piano del tavolo.

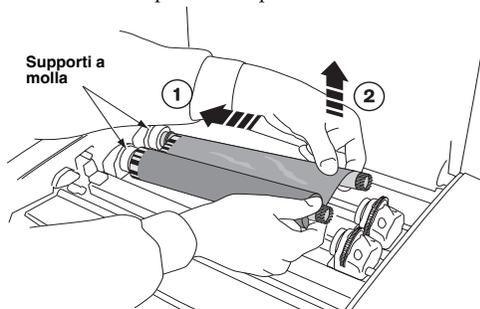


5. Dal menu Open Top Cover (Aprire protezione superiore), selezionare l'opzione di menu Move Ribbon Carriage (Muovere carrello nastro).

6. Premere il tasto **▼** per spostare il carrello del nastro verso il basso e fuori dalla guida.
7. Individuare la testina di stampa e l'erogatore, mostrati nella figura seguente.


AVVERTENZA Per evitare di danneggiare la testina di stampa termica:

- per la pulizia, utilizzare solamente il fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD (Testina di stampa);
- non toccare con le dita la superficie di vetro della testina di stampa; si consiglia di indossare dei guanti.

ATTENZIONE La testina di stampa termica potrebbe essere calda.

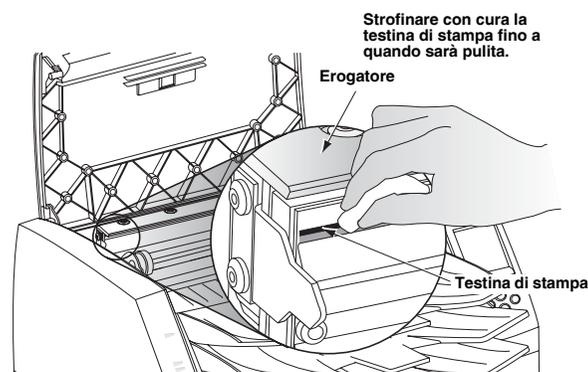

8. Utilizzando il fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD (Testina di stampa) in dotazione con il kit di pulizia del riproduttore di immagini, strofinare con cura avanti e indietro per l'intera larghezza della testina di stampa esercitando una pressione moderata. Il fazzoletto di pulizia potrebbe scolorirsi. Ripetere il movimento avanti e indietro fino a quando la testina di stampa è completamente pulita.
9. Rimuovere la polvere o altri agenti inquinanti dall'erogatore.
10. Guardando all'interno dal lato del riproduttore d'immagini, individuare il rullo arancione o bianco e la barra della guida di erogazione colore, mostrati nella figura seguente.

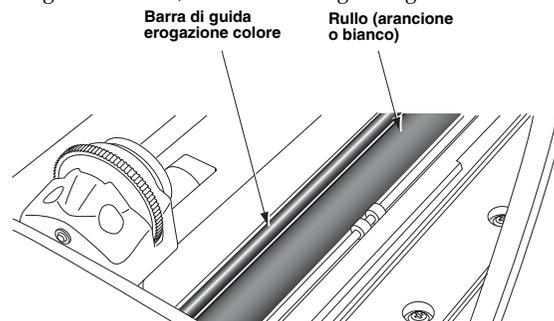

11. Se compare il menu Move Ribbon Carriage (Muovere carrello nastro), premere il pulsante **▶** per tornare al menu Open Top Cover (Apri protezione superiore).

12. Dal menu Open Top Cover (Apri protezione superiore), selezionare l'opzione di menu Rotate Platen (Ruotare rullo). Verrà visualizzato il menu Rotate Platen (Ruotare rullo).
13. Utilizzando il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo) contenuto nel kit di pulizia del riproduttore d'immagini, strofinare in una sola direzione lungo tutto il rullo fino a quando tutta la sporcizia visibile non sarà stata eliminata.

Premere il tasto ▲ o ▼ per far ruotare progressivamente il rullo in modo da poterne pulire tutta la superficie.


AVVERTENZA Per pulire il rullo utilizzare solo il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo). L'utilizzo del fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD (Testina di stampa) potrebbe danneggiare il rullo.

14. Eliminare la polvere o altri agenti inquinanti dalla barra di guida erogazione colore usando il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo) o della PRINT HEAD (Testina di stampa) contenuto nel kit di pulizia del riproduttore d'immagini.
15. Attendere la completa asciugatura della testina di stampa termica e del rullo.

AVVERTENZA La testina di stampa termica deve essere completamente asciutta prima di utilizzare nuovamente il riproduttore d'immagini. Il tentativo di riscaldare la testina mentre è ancora umida potrebbe danneggiarla.

Se è necessario ricaricare il nastro a colori, passare al punto 16. Altrimenti passare al punto 18.

16. Dal menu Open Top Cover (Apri protezione superiore), selezionare l'opzione di menu Move Ribbon Carriage (Muovi carrello nastro). Premere il tasto ▲ per sollevare il carrello del nastro in modo da ricaricare il nastro a colori.
17. Ricaricare il nastro a colori, come mostrato nella seguente figura.

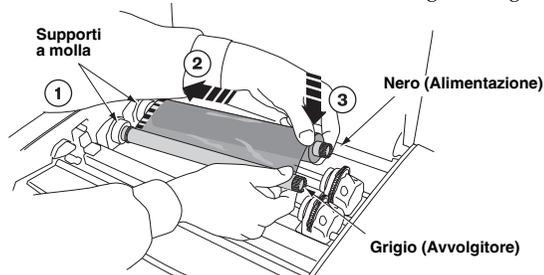


18. Chiudere la protezione superiore.


Pulizia delle rotelline di presa

1. Premere il tasto **PAUSE** sul riproduttore di immagini e attendere fino a quando entrerà nello stato di pausa.
2. Rimuovere i vassoi di raccolta, come mostrato nella seguente figura.


ATTENZIONE Quando i vassoi di raccolta del riproduttore d'immagini sono rimossi, toccare solo i componenti interni di colore verde (ad eccezione delle rotelline di presa). Non indossare anelli, cravatte, gioielli e altri oggetti, e raccogliere i capelli in modo che non possano cadere o rimanere incastrati nel riproduttore di immagini.

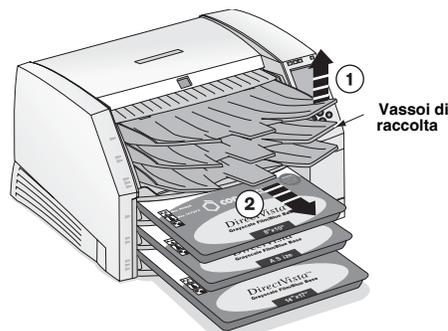

3. Posizionare i vassoi di raccolta su una superficie piana, come mostrato nella seguente figura.

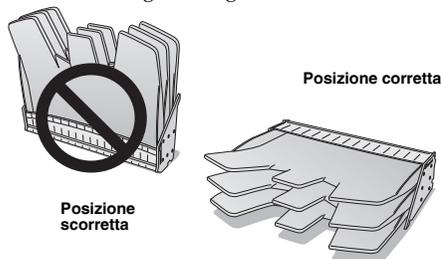

4. Rimuovere tutte le cassette dagli slot di alimentazione.
5. Individuare le rotelline di presa. Sono presenti tre rotelline di presa, una per ciascuno slot di alimentazione. La rotellina più in alto viene mostrata nella seguente figura.

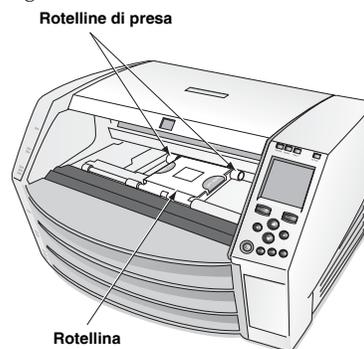

6. Utilizzando il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo), contenuto nel kit di pulizia del riproduttore d'immagini, pulire ciascuna rotellina. Il fazzoletto di pulizia potrebbe scolorirsi.

AVVERTENZA Non toccare le rotelline con le dita; le impronte di grasso cutaneo sono difficili da rimuovere e potrebbero danneggiare le rotelline. Utilizzare solamente il fazzoletto per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo); l'utilizzo del fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD (Testina di stampa) potrebbe provocare danni.

7. Attendere che le rotelline di presa siano completamente asciutte.
8. Riposizionare i vassoi di raccolta e tutte le cassette per i supporti che erano state rimosse.



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPAN
Tel: 81-3-5730-2297
Fax: 81-3-5730-2295