

Horizon® Imager

Instruções de limpeza

O Kit de Limpeza da Horizon Imager contém dois tipos de toalhetes à base de álcool para a limpeza de determinados componentes internos da Horizon Multi-media Dry Imager. Este resumo técnico explica os procedimentos que devem ser seguidos na utilização desses toalhetes.

Efectue esses procedimentos de limpeza como parte da manutenção regular ou quando houver uma degradação perceptível na qualidade da imagem ou no desempenho da impressão. Consulte o *Manual do utilizador do gerador de imagens Horizon* ou o *Manual de inicialização do Horizon* para ver as tabelas do programa de manutenção recomendado e de resolução de problemas.

Alguns utilizadores do Horizon podem preferir utilizar a cassete de limpeza Horizon para limpar as borrachas do alimentador, em vez de utilizar o material de limpeza do rolo de impressão. Pode encomendar a cassete de limpeza Horizon, referência SP-00279, com o representante Codonics.

Limpar a cabeça de impressão térmica e o rolo


1. Prima a tecla **MENU**.
O Main Menu (Menu principal) é apresentado.
2. Selecciona a opção de menu Open Top Cover (Abrir tampa superior).
Após um minuto para arrefecimento dos componentes internos, a tampa superior abre-se parcialmente.
3. Abra completamente a tampa.

AVISO: Quando a tampa do gerador de imagens estiver aberta, toque somente nos componentes internos de cor verde (excepto as borrachas do alimentador). Remova anéis, gravatas, jóias e outros itens, e prenda o cabelo para trás para que não caia no interior do equipamento ou fique preso no aparelho.

Se uma fita colorida estiver instalada, avance para a etapa 4. Caso contrário, vá para a etapa 7.

4. Remova a fita colorida como mostra a figura seguinte.

Observação: Tome cuidado para proteger a fita do pó e da sujidade quando não estiver carregada no gerador de imagens. Evite apoiar a fita sobre a mesa; a energia estática atrai o pó da superfície da mesa.

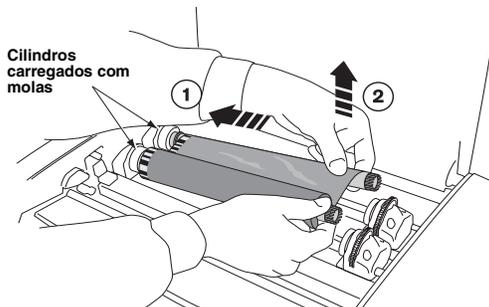


5. No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione a opção de menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita).

6. Prima a tecla **▼** para mover o carro da fita para baixo e para fora do caminho.
7. Localize a guia protectora e a mira de impressão, mostrados na figura seguinte.


CUIDADO: Para evitar danos à cabeça de impressão térmica:

- Utilize somente o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão) durante a limpeza.
- Não toque na superfície de vidro da cabeça de impressão térmica com os dedos; é recomendável utilizar luvas.

AVISO: A cabeça de impressão térmica pode estar quente.

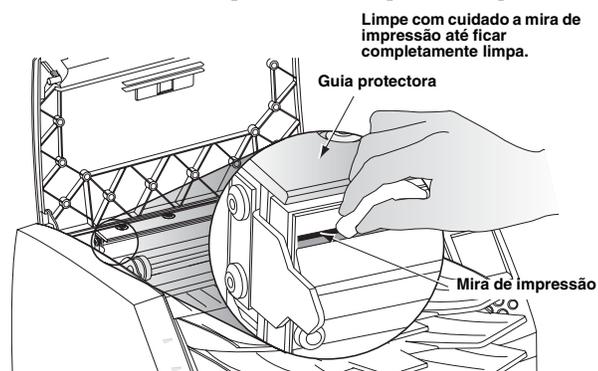

8. Com o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão) fornecido com o kit de limpeza, limpe cuidadosamente para frente e para trás toda a extensão da linha da mira de impressão com pressão moderada. O toalhete pode ficar descolorado. Repita o movimento para frente e para trás até que a mira de impressão esteja completamente limpa.
9. Remova toda a sujidade ou os contaminantes da guia protectora.
10. Olhando para dentro pela lateral do gerador de imagens, localize o rolo laranja ou a barra-guia de alimentação branca, mostrada na figura seguinte.

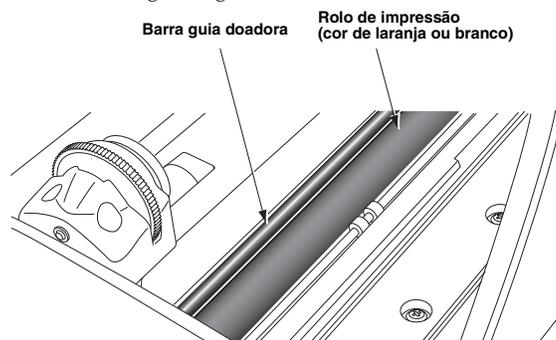

11. Se o menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita) for apresentado, prima a tecla **◀** para voltar para o menu Open Top Cover (Abrir tampa superior).
12. No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione a opção de menu Rotate Platen (Rodar rolo de impressão). O menu Rotate Platen (Rodar rolo de impressão) é apresentado.

- Utilizando o material de limpeza do PLATEN ROLLER (Rolo de impressão) fornecido com o conjunto de limpeza do gerador de imagens, esfregue o rolo apenas num sentido e ao longo de todo o seu comprimento, de ponta a ponta, até que todos os contaminantes visíveis tenham sido removidos.

Prima as teclas ▲ ou ▼ para rodar pouco a pouco o rolo de maneira que possa limpar toda a sua superfície.


CUIDADO: Utilize apenas o material de limpeza do PLATEN ROLLER (Rolo de impressão) quando limpar o rolo. Podem ocorrer danos ao rolamento do rolo se utilizar o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão).

- Limpe todo o pó, ou outros contaminantes, da barra-guia de alimentação, utilizando o material de limpeza do rolo ou da cabeça de impressão fornecido com o conjunto de limpeza do gerador de imagens.
- Aguarde a secagem completa da cabeça e do rolo de impressão térmica.

CUIDADO: A cabeça de impressão térmica deve estar completamente seca antes de o gerador de imagens poder ser utilizado. O reaquecimento da cabeça enquanto ainda está húmida causará danos.

Caso precise recarregar a fita colorida, vá para a etapa 16. Caso contrário, vá para a etapa 18.

- No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione a opção de menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita). Prima a tecla ▲ para mover o carro da fita para cima, para que possa recarregar a fita colorida.
- Recarregue a fita colorida como mostra a figura seguinte.

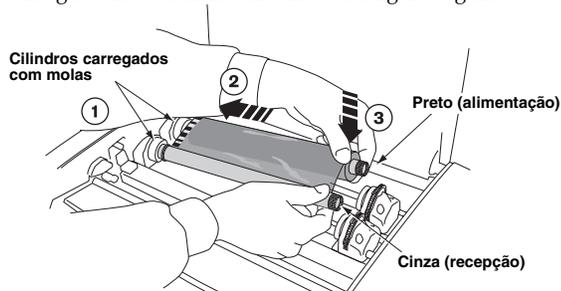


- Feche a tampa superior.


Limpar as borrachas de transporte

- Prima a tecla **PAUSE** (Pausa) e espere até que o mostrador entre no estado de pausa.
- Remova os tabuleiros de recepção, como mostra a figura seguinte.

AVISO: Quando a tampa do gerador de imagens estiver aberta, toque somente nos componentes internos de cor verde (excepto as borrachas do alimentador). Remova anéis, gravatas, jóias e outros itens, e prenda o cabelo para trás para que não caia no interior do equipamento e fique preso no aparelho.

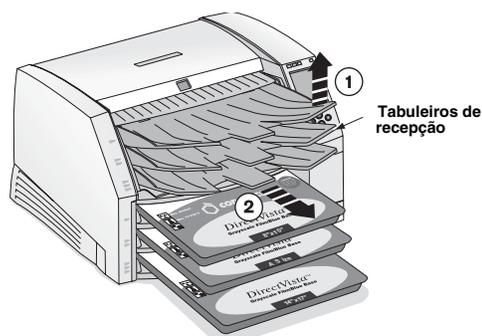


- Coloque os tabuleiros de recepção sobre uma superfície plana, como mostra a figura seguinte.

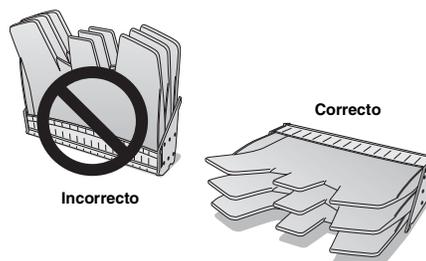

- Remova todos as cassetes de papel das ranhuras de alimentação.
- Localize as borrachas de transporte.

Há três conjuntos, um para cada ranhura de alimentação. O conjunto mais acima é mostrado na figura seguinte.

Borrachas de transporte

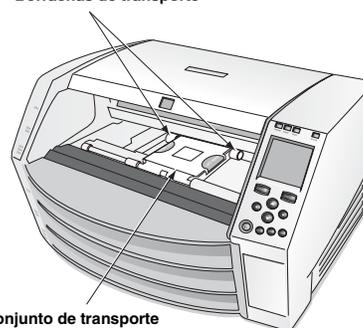

- Utilizando o material de limpeza do PLATEN ROLLER (Rolo de impressão) fornecido com o conjunto de limpeza do gerador de imagens, limpe à volta de cada borracha. O toalhete pode ficar descolorido.

CUIDADO: Não toque nas borrachas do alimentador com os dedos; a gordura da pele é difícil de remover e pode acabar por danificá-las. Utilize somente o toalhete PLATEN ROLLER (Rolo de impressão), podem ocorrer danos ao rolamento do rolo se utilizar o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão).

- Aguarde a secagem completa das borrachas de transporte.
- Recoloque os tabuleiros de recepção e quaisquer cassetes de papel que tenham sido removidos.



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 EUA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPÃO
Telefone: 81-3-5730-2297
Fax: 81-3-5730-2295