

Codonics farvepapir


Med flere af nutidens medicinske systemer ved hjælp af farve applikationer, Codonics fører branchen med vores ChromaVista® Farvepapir

"Vi arbejder med en neurologigruppe, der var begejstret, da de så, hvordan vores knivskarpe farvestudier på papir

kunne gled bekvemt ind i patientdiagrammer. Det ændrede bogstaveligt talt deres praksis."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Klinikken, Institut for ClevelandRegional Radiologi

- Codonics eksklusive Medicinsk farvematchning (MCM™) sikrer, at udskrifter matcher skærme med softcopy
- Ideel til henvisende læger og patient take-homes
- Specielt designet til medicinske anvendelser, Codonics farvepapir er FDA godkendt og fuldt arkiverbart
- Billedkvaliteten er langt bedre end laser- og kontorprintere med 16,7 millioner farver
- Den eneste farve produktion i branchen, der virkelig rivaler konventionel farve fotografisk film

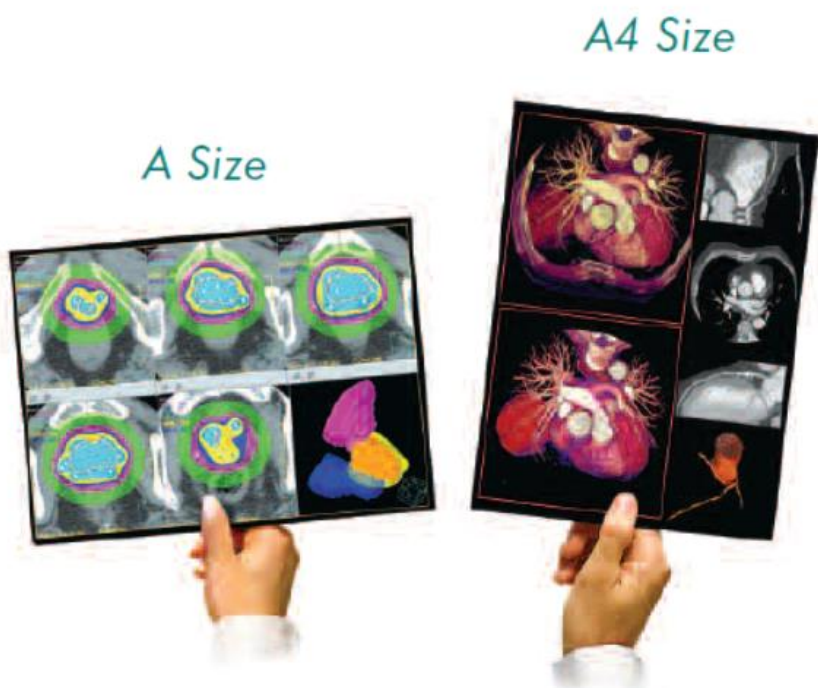


Codonics ChromaVista®

Farvepapir

Codonics introducerede verdens første DICOM farve imager og har været banebrydende multi-media imagers i over et årti. Vi er branchen førende i farvebilleder med over 25.000 installationer over hele verden.

Vores Horizon Multi-media Imager har fantastiske farveudskrivning fra kant til kant, maksimering af billedbehandling størrelse og reducere spild. Codonics eksklusiv Medicinsk farvematchning (MCM™) er en avanceret billedbehandlingsfunktion, der justerer udskrevne outputfarver, så de passer nøjagtigt til skærme med softcopy. Denne proces korrigerer forskelle i farvetone, mætning, og intensitet mellem printeren og soft-copy gennemgangstationer. Brugeren kan nemt bestemme det bedste match til deres skærm ved hjælp af den automatiske MCM bracketing funktion, som er indbygget i hver Codonics imager.

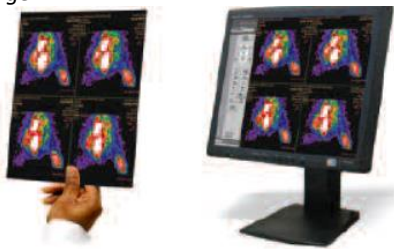

Farveudskrifter matcher altid softcopy-skærme med vores eksklusive Funktionen MEDICINSK Farvetilpasning (MCM™). Sammenhæng, klarhed og mætning med Codonics farvefarve-diffusion teknologi langt overstiger voks- eller inkjetprintere.

ChromaVista Farvepapir har en tung, foto-vægt grundmateriale, der modstår vand og rive. Da der ikke er blæk eller toner, udtværer eller overfører billederne aldrig til hænder eller andre udskrifter.

Specifikationer:

- Kompatibel med Horizon og NP/ EP-multimedieimager
- Kontinuerlig tonefarvegengivelse
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD (reflekterende)
- Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgængelige størrelser:

Horisonten

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Send en e-mail info@codonics.com
www.codonics.com

**For mere information kontakt Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 og bede om
vores mediasalgafdeling.**

* ChromaVista Farvepapir er tilgængelig til brug i de fleste Codonics imagers, nogle model og størrelse restriktioner gælder. Specifikationerne er ændres uden varsel. Kontakt din Codonics repræsentant for at få de seneste oplysninger. Ophavsret © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A